




osseotouch
TOTAL CONTROL

IMPLANT SYSTEMS

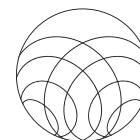

osseotouch
TOTAL CONTROL

IMPLANT SYSTEMS

Osseotouch

• Company profile	006
• Tecnologia magneto dinamica in implantologia	007
• Vantaggi della tecnologia magneto dinamica	008
• La tecnologia magneto dinamica applicata all'implantologia	009
• Qualità	010
• Linea implantare Osseotouch	011
• Impianti ed osteotomi: Insieme	012

Impianti

• Colorazioni diametro	016
• Conex - k	017
• Caratteristiche impianto	
• Diametri e altezze	
• Connessione conica	
• Componenti protesiche	
• Only One	032
• Caratteristiche impianto	
• Diametri e altezze	
• Componenti protesiche	
• Progettazione CAD/CAM	043

Strumentario

• Cacciaviti protesi	047
• Driver Only One	048
• Driver Conex - K	049
• Extra	051

Kit Chirurgico

• Praticità e Comfort	054
• Specifiche	055

Protocollo

• Conex-K e Only One	058
• Protocollo per impianti Conex - K e Only One	059


Kit Chirurgia Guidata

• Dynamic Guided	068
• Specifiche	069

Progettazione Guidata

• Chirurgia guidata magneto dinamica	072
--	-----



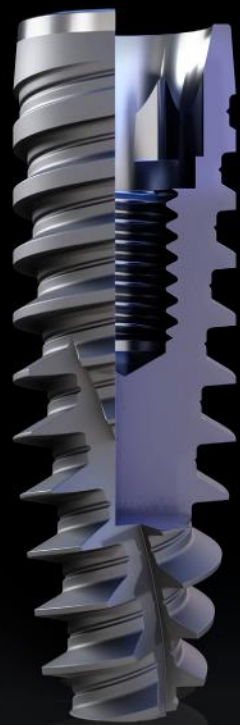

“Lo strumento giusto,
nelle mani giuste.”



Company profile

Osseotouch è composta da un team di professionisti orientato alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per rivoluzionare e semplificare la chirurgia orale. La mission aziendale è amplificare la facilità degli interventi con un comfort completamente nuovo per l'operatore e per il paziente grazie al brevetto magneto dinamico. È una realtà dinamica e dalla vocazione internazionale. Le idee e i brevetti sono il milestone aziendale, portati all'esaltazione dal confronto clinico con medici di fiducia.

“Siamo un'azienda italiana che sviluppa brevetti e dispositivi con la più avanzata tecnologia disponibile nel settore dentale: la magneto dinamica. Distribuiamo il Magnetic Mallet ed Easyroot insieme a una vasta gamma di strumenti chirurgici con l'intento di accompagnare e supportare il chirurgo in una pratica quotidiana sempre più intuitiva, semplice e predicibile.”



Tecnologia magneto dinamica in implantologia

La tecnologia magneto dinamica si fonda sul concetto di accelerazione, minimizzando il tempo di impatto e massimizzando la forza e l'efficacia. Gli intervalli di forza e accelerazione necessari per poter eseguire chirurgie mininvasive possono essere generati solo dal magnetismo. Il controllo e la costanza delle forze sono essenziali per garantire all'operatore la sicurezza necessaria durante le procedure. La potenza controllata permette di gestire i tessuti in maniera sicura, veloce e minimamente invasiva. Per questo Osseotouch collabora solo con partner certificati di primo livello in un network che innova e produce sempre nuove idee, crescendo nel mondo e in nuovi settori, portando l'eccellenza italiana nei 5 continenti.



“L’impulso a creare,
scoprire, evolvere.”

Vantaggi della tecnologia magneto dinamica

“Ogni artista ha il suo strumento. E lo conosce come conosce se stesso”.

Velocità

La propulsione magneto dinamica applica più forza rispetto agli strumenti manuali, garantendo più efficacia nell'operazione.

Precisione

Le forze sono focalizzate nell'area trattata limitando al massimo la loro dispersione, generando più comfort per il paziente e totale accuratezza nella procedura.

Direzionalità

L'ergonomia del manipolo ne permette l'utilizzo con una sola mano e ne facilita il posizionamento nell'area da trattare.

Visibilità

La mancanza di irrigazione aumenta la visibilità dell'operatore, in grado di controllare la progressiva penetrazione dello strumento.

Controllo

In qualsiasi procedura le forze sono applicate con grande precisione e in maniera predicibile, assicurando un totale controllo da parte dell'operatore.

Freddo

Il Magnetic Mallet riduce in maniera sostanziale la generazione del calore per cui non è necessario l'utilizzo dell'irrigazione.

Zero foratura e taglio

Muove, rimpiazza, riforma, condensa, senza mai rimuovere l'osso, lasciando i tessuti molli intatti.

Versatilità

Molteplici funzioni con lo stesso manipolo utilizzando sempre la forza necessaria per ogni procedura grazie a un elevato grado di progressività.

La tecnologia magneto dinamica applicata all'implantologia


“Che cos'è l'arte?”

Nell'implantologia moderna, la compattazione talvolta è resa indispensabile da qualità ossee insufficienti. Preparare senza rimuovere per conservare il 100% di osso è la soluzione più salubre e semplice per ottenere il miglior risultato possibile.

La preparazione con osteotomi magneto dinamici è la soluzione migliore per garantire una chirurgia sicura e predicibile in tutta l'implantologia mascellare.

Gli studi dimostrano come la qualità e la quantità di osso non riscaldato durante il processo di bone shaping sia migliore e riduca i rischi di fibrointegrazione considerati i precursori per problemi di integrazione. Sequenze e preparazioni miste rendono applicabile questo concetto in ogni area, in quanto il protocollo si adatta ad ogni conformazione, indipendentemente dalla qualità ossea. La linea implantare Osseotouch semplifica la preparazione del sito implantare osteotomica.

“E' dare forma alla materia unendo tecnica e intelletto.”

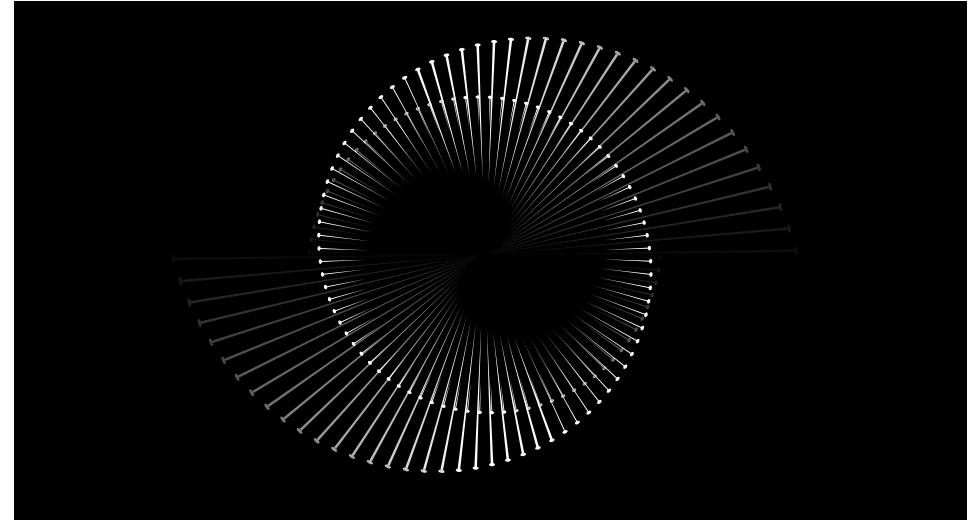

Conex - K e Only One sono due impianti che combinano l'implantologia moderna alla tecnica della chirurgia magneto dinamica.

La linea implantare Osseotouch offre una gamma completa di componenti protesiche e strumenti chirurgici in grado di offrire svariate alternative alle differenti situazioni cliniche e di garantire un corretto trattamento di riabilitazione. Gli impianti riportano la marcatura CE e sono conformi alla Direttiva Europea concernente i Dispositivi medico-chirurgici.

Gli impianti Conex - K e Only One semplificano la preparazione implantare osteotomica in sequenza mediante un protocollo dedicato, ideato con l'obiettivo di conservare più osso nativo possibile. Nell'atto chirurgico, le quote dedicate rispecchiano a pieno le dimensioni degli impianti che avranno un fit ottimale per una stabilità primaria e un BIC eccellente.

Qualità

La ricerca continua di Osseotouch garantisce un costante miglioramento delle soluzioni proposte.

01 IL KNOW HOW E LE COMPETENZE.

La conoscenza e la preparazione sviluppate nel settore assicurano un'assoluta qualità in ogni fase di lavorazione della linea implantare Osseotouch: dallo sviluppo alla progettazione, dalla produzione al controllo, dalla sterilizzazione al packaging, a garanzia del successo tecnologico e biologico.

02 TECNOLOGIE E MACCHINARI.

L'idea iniziale di un impianto o di una componente protesica viene progettata attraverso l'uso di sistemi CAD/CAM di ultima generazione e sviluppata grazie a solide competenze, sistemi innovativi e macchinari all'avanguardia.

03 I PRINCIPALI MATERIALI.



Gli impianti sono realizzati con materiali biocompatibili di alta qualità, sviluppati e testati per garantire risultati efficaci, sicuri e a lungo termine.

04 SISTEMA QUALITÀ.

La linea implantare Osseotouch è costantemente controllata per garantire massima sicurezza e rintracciabilità. Gli impianti rispondono a standard internazionali e sono conformi alle rigide norme di qualità UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.



Linea implantare Osseotouch

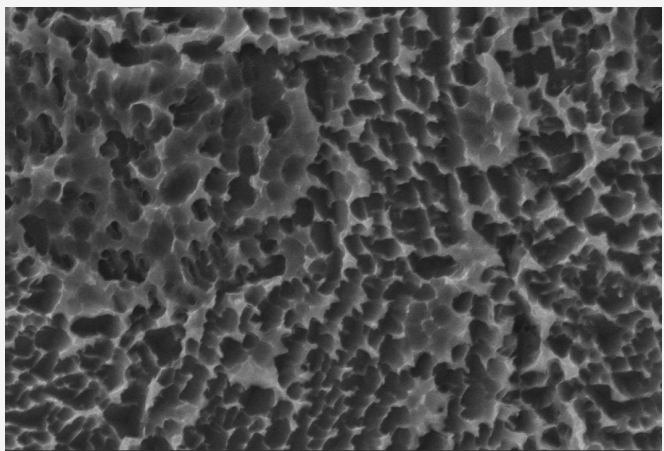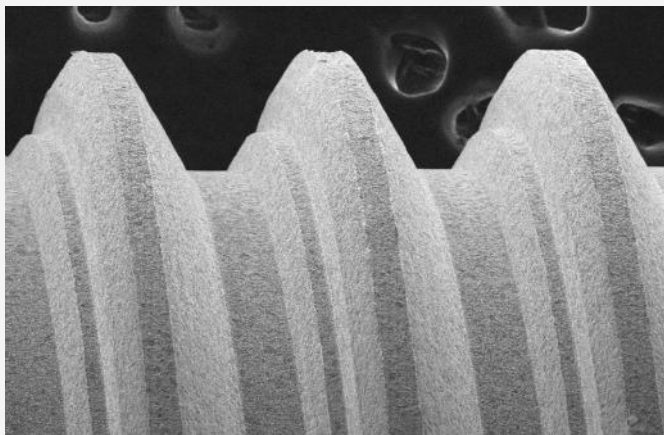

Trattamento di superficie BIO-ACTIVE

Gli impianti sono realizzati in titanio grado 4 per uso medicale. Studi istologici su impianti hanno evidenziato migliori prestazioni delle superfici BIO-ACTIVE, soprattutto in situazioni di osso di scarsa qualità. Il trattamento BIO-ACTIVE consiste in un doppio processo di acidificazione. Ogni processo prevede la decontaminazione finale mediante plasma freddo. Il plasma a freddo è importante per ridurre la tensione superficiale e per far sì che il sangue/coagulo sia più adeso alla superficie implantare. I vantaggi introdotti dalla finitura superficiale BIO-ACTIVE emergono in modo più evidente nelle situazioni complesse, dove la miglior risposta biologica riesce a sopperire al ridotto contributo meccanico. Questa particolare micro-topografia consente alla superficie di comportarsi come una spugna, interagendo fortemente con il coagulo e stimolando la rigenerazione ossea.

Assenza di contaminazioni per una corretta osteointegrazione

L'elevato grado di pulizia della superficie BIO-ACTIVE è stato confermato dall'analisi della composizione chimica superficiale mediante esame XPS, che fornisce un'indicazione chiara della composizione chimica degli strati del materiale che vengono in contatto con il tessuto osseo. I risultati sono riportati nella tabella sottostante.

C	O	Ti	N	Si	P
30.8	47.1	19,3	0.9	1.2	0.7

Nell'analisi del titanio, viene rilevata la presenza dei seguenti elementi: titanio, ossigeno e carbonio. Quest'ultimo elemento deriva dalla presenza di molecole carboniose inevitabilmente presenti nell'atmosfera terrestre.

Impianti e osteotomi: insieme

“Un duo unico”

Perfect FIT

La chirurgia a “zero sottrazione” diventa funzionale con l’inserimento di una fixture implantare debitamente progettata per la sistematica magneto dinamica.


La tecnica, esaltata in condizioni estreme, insieme a un protocollo facile e progressivo di condensazione, rendono semplice e naturale l’inserimento chirurgico.

Il protocollo chirurgico è ideato per offrire all’operatore la possibilità di scelta tra una procedura classica o di compattazione, e permette di ottenere una densità ossea ottimale.







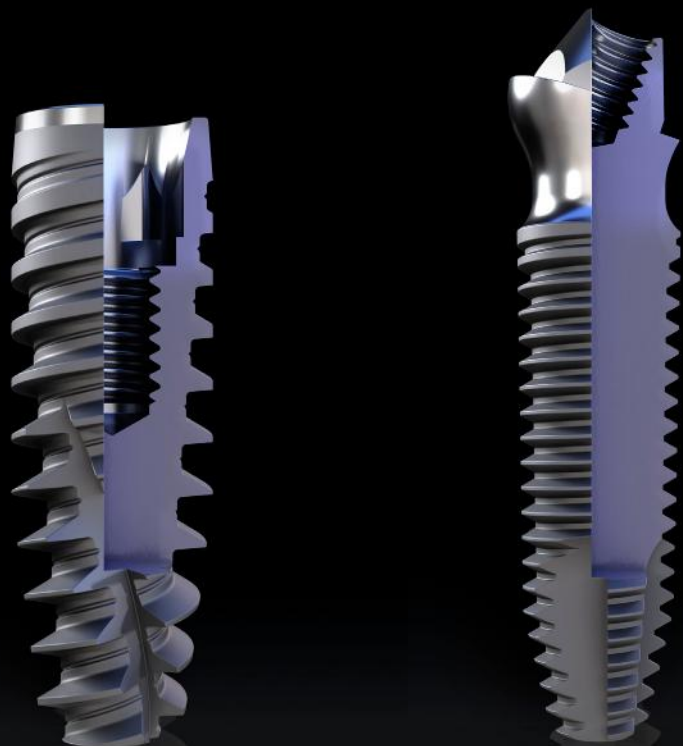

“La libertà di scegliere
il tuo strumento.
Tu, cosa sceglierai?”

Impianti

Impianti | Colorazioni diametro

Conex - K



Only One



Tutta la linea implantare Osseotouch è contrassegnata con un colore specifico in base al tipo di piattaforma come riportato nella tabella sottostante.

● Ø 3,30 / 3,75

● Ø 4,25 / 5

Piattaforma	3,5	4	One Piece
Colore	●	●	●

Tutte le componenti protesiche hanno colorazioni differenti a seconda della piattaforma di utilizzo. La colorazione è data dall'anodizzazione della superficie.

La linea implantare Osseotouch con connessione CONICA 12° è progettata per garantire stabilità ed affidabilità in tutte le procedure cliniche.


- Eccellente stabilità dei tessuti a lungo termine
- Perfetto sigillo interno, riduce significativamente l'infiltrazione
- Migliore distribuzione dei carichi laterali all'interno dell'impianto
- Diminuzione di mobilità del moncone dopo la protesizzazione
- Minimizza il riassorbimento osseo

Questo tipo di accoppiamento assicura un'elevata resistenza meccanica, che si traduce in una significativa diminuzione dei micro-movimenti. Tutti gli impianti sono forniti con la vite di copertura.

CONEX-K



Conex - K | Caratteristiche impianto

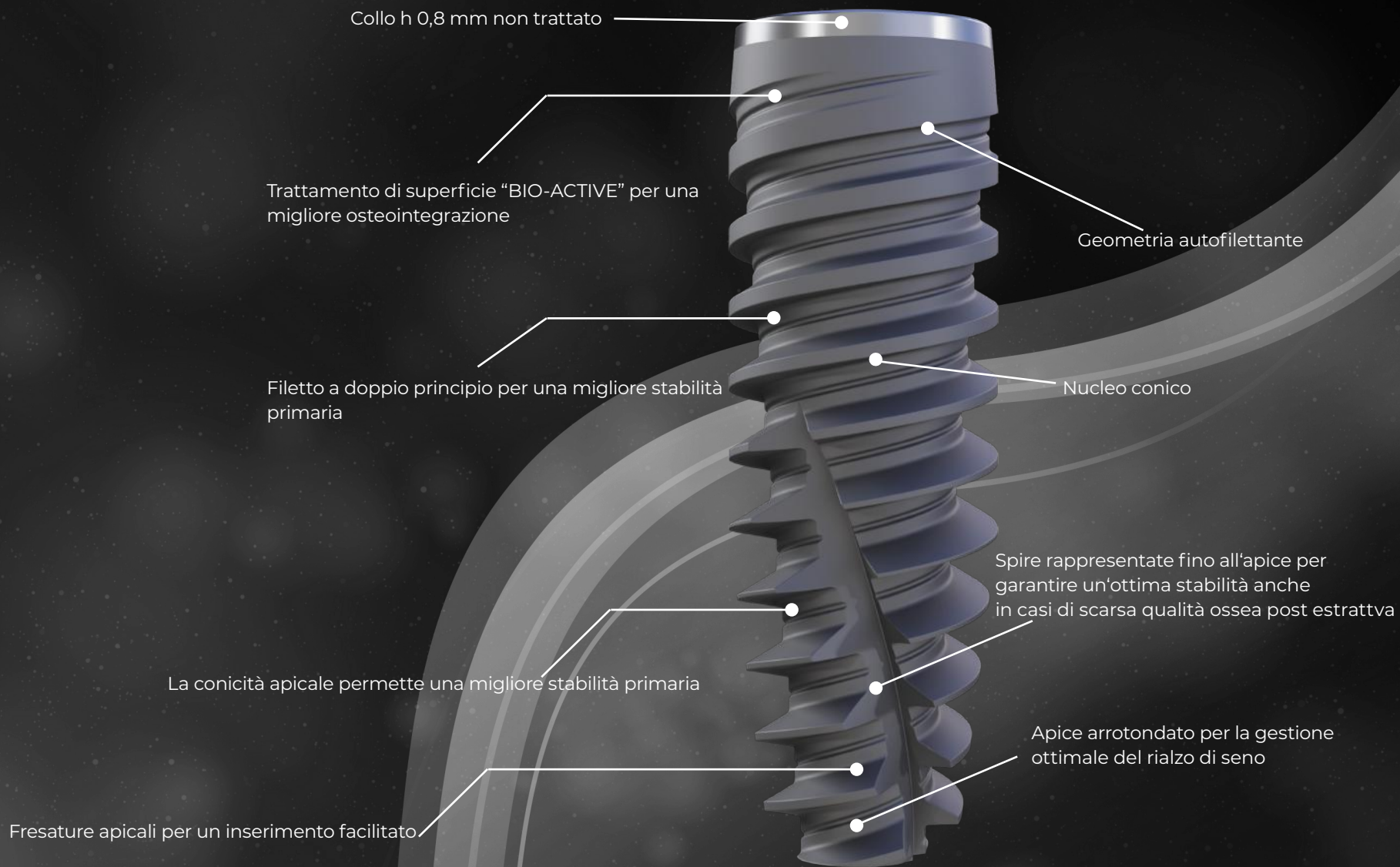

Conex - K | Diametri e altezze

Impianto in titanio Gr. 4 con un'eccezionale versatilità: quattro diametri e molteplici lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione implanto-protesiche. *La vite di copertura è inclusa in ogni impianto.*

Diametro 3.30 mm | Hex 2.25 | Piattaforma NP



Altezza	6	7	8,5	10	11.5	13	15	18	20
Codice	-	-	-	WK3310-SPI	WK3311-SPI	WK3313-SPI	WK3315-SPI	-	-

Diametro 3.75 mm | Hex 2.25 | Piattaforma NP



Altezza	6	7	8,5	10	11.5	13	15	18	20
Codice	-	-	WK3708-SPI	WK3710-SPI	WK3711-SPI	WK3713-SPI	WK3715-SPI	WK3718-SPI	-

Diametro 4.25 mm | Hex 2.65 | Piattaforma RP




Altezza	6	7	8,5	10	11.5	13	15	18	20
Codice	-	WK4207-MPI	WK4208-MPI	WK4210-MPI	WK4211-MPI	WK4213-MPI	WK4215-MPI	-	-

Diametro 5.0 mm | Hex 2.65 | Piattaforma RP



Altezza	6	7	8,5	10	11.5	13	15	18	20
Codice	WK5006-MPI	WK5007-MPI	WK5008-MPI	WK5010-MPI	WK5011-MPI	WK5013-MPI	-	-	-

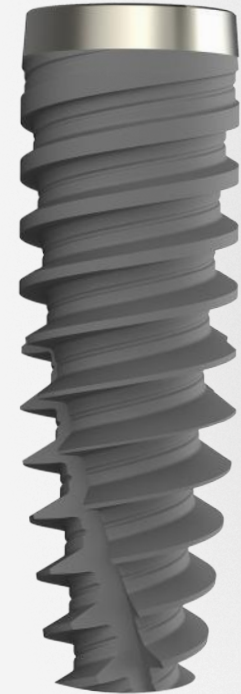

Conex - K | Connessione conica

La linea implantare Osseotouch è progettata per garantire stabilità ed affidabilità in tutte le procedure cliniche. La connessione conica con blocco esagonale rappresenta la più avanzata tecnologia attualmente disponibile in campo implanto-protesico, in grado di garantire una stabilità maggiore tra l'impianto e l'abutment, aumentando il sigillo e riducendo l'infiltrato batterico.

Platform switching

Connessione conica a 12°

Precisione della connessione 10 µ

Vite protesica - accoppiamento conico

Vite di guarigione

- In titanio Gr. 5
- Indicata per il condizionamento dei tessuti molli
- Ampia scelta di altezze

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



Altezza Tm*	Diametro	Codice
3	4,0	W-VG30-SPI
4		W-VG40-SPI
5		W-VG50-SPI
7		W-VG70-SPI
3	4,5	W-VG30-MPI
4		W-VG40-MPI
5		W-VG50-MPI
7		W-VG70-MPI



Analogo dell'impianto

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto

Vite di connessione inclusa



h	Codice
14	W-AN-SPI
14	W-AN-MPI



Transfer da impronta tecnica pick-up

- In titanio Gr. 5
- Utile per il rilevamento delle impronte mediante porta impronta individuale

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



h Coron.	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
13	1,5	W-TR1-SPI	W-TR-SPI
	3	W-TR3-SPI	
13	1,5	W-TR1-MPI	W-TR-MPI
	3	W-TR3-MPI	



Transfer da impronta a strappo

- In titanio Gr. 5
- Utile per rilevamento dell'impronta con porta-impronta chiusi

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
9	4	1,5	W-TRS-SPI	VSSP
9	4,5	3	W-TRS-MPI	VSMP



Moncone per provvisori

- In titanio Gr. 5
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX)

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
15	hex	4	1,5	W-MTE1-SPI	VSSP
			3	W-MTE3-SPI	
	no hex	4	1,5	W-MTNE1-SPI	
			3	W-MTNE3-SPI	
15	hex	4,5	1,5	W-MTE1-MPI	VSMP
			3	W-MTE3-MPI	
	no hex	4,5	1,5	W-MTNE1-MPI	
			3	W-MTNE3-MPI	



Moncone dritto

- In titanio Gr. 5
- Per protesi cementate, corone singole o ponti
- Spalla determina la chiusura del margine coronale
- Fresabile secondo necessità protesiche

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
10	4	1,5	W-MD1-SPI	VSSP
		3	W-MD3-SPI	
10	4,5	1,5	W-MD1-MPI	VSMP
		3	W-MD3-MPI	



Moncone angolato

- In titanio Gr. 5
- Per protesi cementate, corone singole o ponti
- Fresabile secondo le necessità protesiche

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Angolo	Codice	Codice Vite
10	4	1,5	15°	W-MA151-SPI	VSSP
		3		W-MA153-SPI	
		1,5	25°	W-MA251-SPI	
		3		W-MA253-SPI	
10	4,5	1,5	15°	W-MA151-MPI	VSMP
		3		W-MA153-MPI	
		1,5	25°	W-MA251-MPI	
		3		W-MA253-MPI	



Moncone a sfera

- In titanio Gr. 5
- Trattamento TiN sulla sfera patrice
- Patrice indicata per protesi mobili

Vite di connessione inclusa


**Tm - Transmucosa*

Ø Sfera	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice
2,5	4	1	W-MS01-SPI
		2	W-MS02-SPI
		3	W-MS03-SPI
		4	W-MS04-SPI
2,5	4,5	1	W-MS01-MPI
		2	W-MS02-MPI
		3	W-MS03-MPI
		4	W-MS04-MPI



Conex - K | Componenti protesiche

Codice	Accessori Equator e OT-CAP
044CAIN	2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO da impronta da strappo con cappetta intercambiabile
144AE	2 ANALOGHI DI LABORATORIO

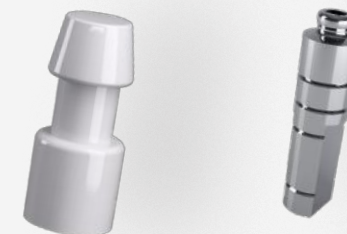

Codice	Ricambi OT-CAP
140CER	4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
140CEG	4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)
140CEN	4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
141CAE	2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
192ACN	KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO
	1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
	1 CAPPETTA NERA da laboratorio
	4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
	1 DISCHETTO PROTETTIVO
060CRN AY	6 CAPPETTE NORMO GIALLE (ritenzione extra soft) - 500g
040CRN SN	6 CAPPETTE NORMO ROSA (ritenzione soft) - 900g
040CRN	6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD)- 1300 g
041CAN	2 CONTENITORI INOX NORMO
100SAN	10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO



Conex - K | Componenti protesiche

Codice	Kit OT Equator per impianti
130NAC35 Opzione h. 1-2-3-4	1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
	1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
	1 DISCHETTO PROTETTIVO
	4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 Gialla extra -soft, 1 Rosa soft, 1 Bianca trasparente standard , 1 Viola forte)



Codice	Moncone OT Equator in Titanio con rivestimento
030NAC35 Opzione h. 1-2-3-4	MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO



Codice	Kit Equator assortimento Cappette
192ECE	1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
	1 CAPPETTA NERA da laboratorio
	4 CAPPETTE RITENTIVE (1 Gialla extra -soft, 1 Rosa soft, 1 Bianca trasparente standard , 1 Viola forte)
	1 DISCHETTO PROTETTIVO



Codice	Accessori Equator
774CHE	1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER



T - Base

- In titanio Gr. 5
- Utilizzati per CAD/CAM
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX).

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
4	hex	4	1	W-TBE1A-SPI	VSSP
			3	W-TBE3A-SPI	
	no hex	4	1	W-TBNE1A-SPI	
			3	W-TBNE3A-SPI	
7	hex	4	1	W-TBE1B-SPI	VSSP
			3	W-TBE3B-SPI	
	no hex	4	1	W-TBNE1B-SPI	
			3	W-TBNE3B-SPI	
4	hex	4,5	1	W-TBE1A-MPI	VSMP
			3	W-TBE3A-MPI	
	no hex	4,5	1	W-TBNE1A-MPI	
			3	W-TBNE3A-MPI	
7	hex	4,5	1	W-TBE1B-MPI	VSMP
			3	W-TBE3B-MPI	
	no hex	4,5	1	W-TBNE1B-MPI	
			3	W-TBNE3B-MPI	



Scan body

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Utilizzato per la rilevazione, con l'ausilio di scanner digitali intraorali

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Descrizione	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
interno conico SP	3,5	1,5	W-SCAN-SPI	VSSP
interno conico MP	3,5	3	W-SCAN-MPI	VSMP




Moncone Cr/Co

- Moncone in cromocobalto
- Per sovrافusione corone singole ponti e barre
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX)

Vite di connessione inclusa

*Tm - Transmucosa

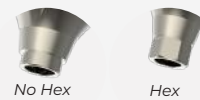

h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
10	hex	4	1	W-MCRE1-SPI	VSSP
			3	W-MCRE3-SPI	
10	no hex	4	1	W-MCRNE1-SPI	
			3	W-MCRNE3-SPI	
10	hex	4,5	1	W-MCRE1-MPI	VSMP
			3	W-MCRE3-MPI	
10	no hex	4,5	1	W-MCRNE1-MPI	
			3	W-MCRNE3-MPI	



Analogo digitale

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto
- Realizzati nella versione digitale sono indicati per coloro che realizzano modelli stampati

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice
14	W-AND-SPI
14	W-AND-MPI



Moncone MUA dritto

- In titanio Gr. 5
- Fornito con portatore in plastica (cod. ALPORT)

Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice
4	1,5	W-UMD1-SPI
4	2	W-UMD2-SPI
4	3	W-UMD3-SPI
4,5	1,5	W-UMD1-MPI
4,5	2	W-UMD2-MPI
4,5	3	W-UMD3-MPI



Moncone MUA angolato 17° o 30°

- In titanio Gr. 5
- Posizionatore in acciaio pre-assemblato

Angolo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
17°	4	2	W-UMA172-SPI	W-MAVIT-SPI
		3	W-UMA173-SPI	
30°	4	3	W-UMA303-SPI	
		4	W-UMA304-SPI	
		5	W-UMA305-SPI	
17°	4,5	2	W-UMA172-MPI	W-MAVIT-MPI
		3	W-UMA173-MPI	
30°	4,5	3	W-UMA303-MPI	
		4	W-UMA304-MPI	
		5	W-UMA305-MPI	




Vite di guarigione MUA

- Realizzata in POM-C

Vite di connessione inclusa

h Coron.	Codice	Codice vite
4	U-CC-MPE	ALTAPS
8	U-CL-MPE	

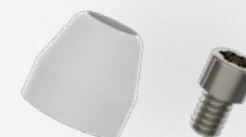


Transfer d'impronta MUA

- In titanio Gr. 5
- Utile per il rilevamento delle impronte mediante porta impronta individuale

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Codice	Codice vite
10	U-TR-MPE	ALICMAS

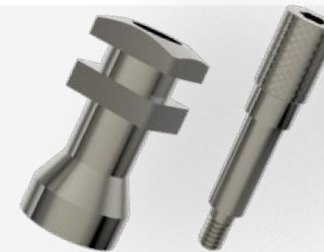

Analogo da laboratorio MUA

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del MUA

Vite di connessione inclusa

Altezza Tm*	Codice
13	U-AN-MPE



Cilindro provvisorio ritentivo MUA

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
12	U-MT-MPE	ALTAPS




Cilindro provvisorio liscio MUA

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
10	U-MTL-MPE	ALTAPS

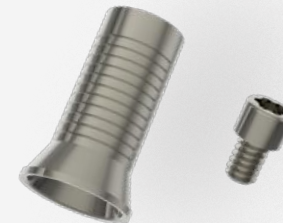


Moncone calcinabile MUA

- Realizzata in POM-C
- Fresabile e fondibile secondo le esigenze

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
10	U-C-MPE	ALTAPS

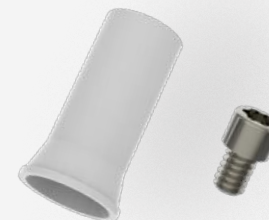


Scan body MUA

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Utilizzato per la rilevazione dell'esatta posizione MUA

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Codice	Codice vite
U-SCAN-MPE	ALTAPS

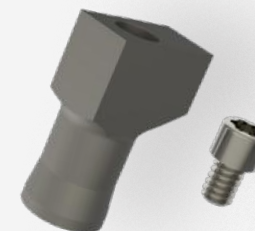


Analogo digitale MUA

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del MUA

Vite di connessione inclusa

h Coron.	Codice
10	U-AND-MPE

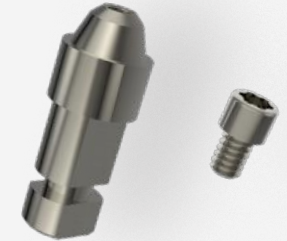

Only One | Caratteristiche impianto

Impianto monofasico progettato per offrire soluzioni innovative nei trattamenti a carico immediato e assenza di infiltrazione batterica. Un unico pezzo, molto pratico, che garantisce una migliore stabilità protesica.

- Eccellente stabilità dei tessuti a lungo termine
- Migliore distribuzione dei carichi laterali all'interno dell'impianto
- Riduzione della mobilità protesica

Only One

Moncone dritto, angolato 17° o 30°



Only One | Caratteristiche impianto

Connessione ottagonale
per l'avvitamento dell'impianto

Profilo anatomico transmucoso

Minore fragilità e assenza di infiltrato
batterico

Trattamento di superficie
"BIO-ACTIVE"

Conicità apicale

Fresature apicali
per un inserimento
facilitato

Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O D R I T T O

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro 3.30 mm | Dritto



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO3310002	OO3311002	OO3313002	-	-

Diametro 4.00 mm | Dritto



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO4010002	OO4011002	OO4013002	OO4015002	-



Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O A N G O L A T O 1 7 °

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro **3.30 mm** | Angolazione **17°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO3310172	OO3311172	OO3313172	OO3315172	-

Diametro **4.00 mm** | Angolazione **17°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO4010172	OO4011172	OO4013172	OO4015172	-



Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O A N G O L A T O 3 0 °

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro **3.30 mm** | Angolazione **30°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	-	OO3311304	OO3313304	OO3315304	-

Diametro **4.00 mm** | Angolazione **30°**




Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	-	OO4011304	OO4013304	OO4015304	OO4018304



Only One | Monofasico

E' un impianto monofasico dedicato alle protesi avvitata con carico immediato. Garantisce una migliore meccanica e un'assenza di infiltrato batterico semplificando le procedure protesiche.

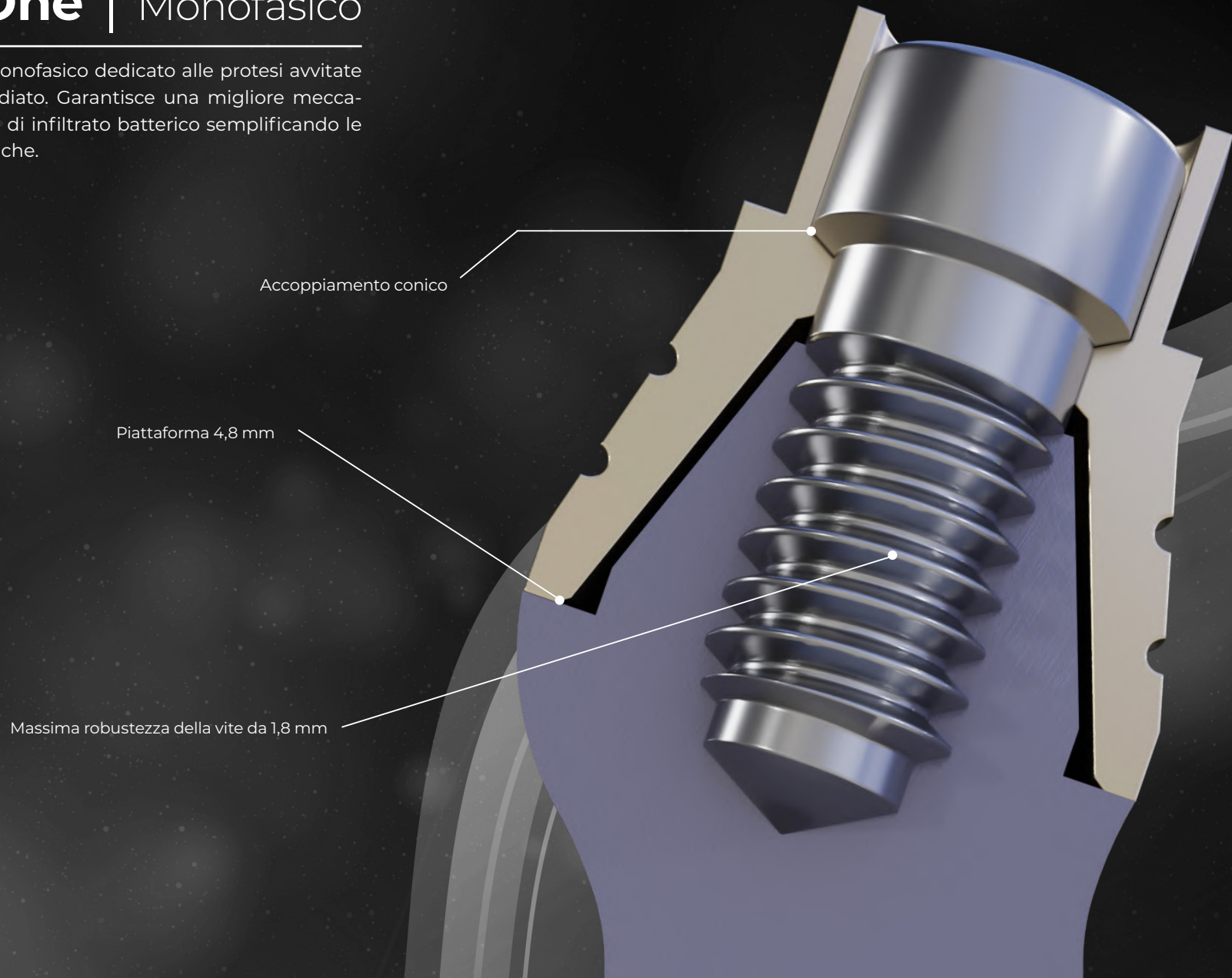


Vite di guarigione

- Realizzata in POM-C
- Indicata per il condizionamento dei tessuti molli

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice	Codice vite
4	U-CC-OO	VS-OO
8	U-CL-OO	

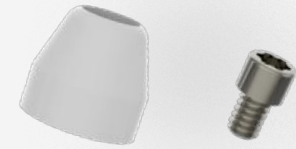


Transfer d'impronta

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice	Codice vite
10	U-TR-OO	VTR-OO

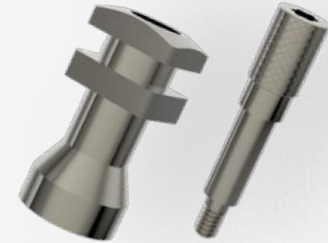

Analogo da laboratorio

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del Mua

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice
13	U-AN-OO



Cilindro provvisorio ritentivo

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa



Altezza	Codice	Codice vite
12	U-MT-OO	VS-OO




Moncone calcinabile

- Realizzato in POM-C
- Fresabile e fondibile secondo le esigenze

Vite di connessione inclusa



Altezza	Codice	Codice vite
10	U-C-OO	VS-OO

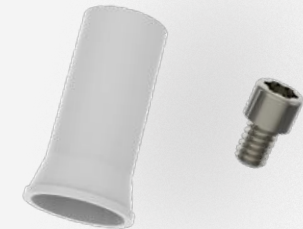


Scan body

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Per la rilevazione, con l'ausilio di scanner, dell'esatta posizione dell'impianto endosseo

Vite di connessione inclusa



Codice	Codice vite
U-SCAN-OO	VS-OO

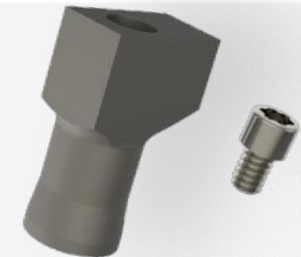


Analogo digitale

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto

Vite di connessione inclusa



Codice	Codice vite
U-AND-OO	10

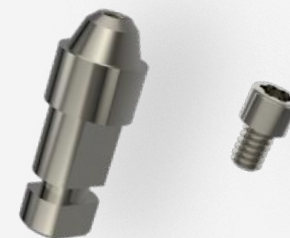







Progettazione CAD/CAM

“Ogni artista sa che
una buona idea ha un
progetto alla base.”



Interfaccia digitale per la progettazione

Sfruttare la possibilità di avere un'interfaccia digitale per la progettazione protesica diventa essenziale per ogni manufatto protesico, sia esso avvitato o cementato.

Scopri le librerie

Librerie digitali dedicate **CONEX - K** e **ONLY ONE** con **Exocad**, **Dental wings**, **3Shape**.

Scaricale [qui](#)





“La soluzione non è inventarsi nuovi
strumenti, ma farli suonare
in modo nuovo.”

Strumentario

Avvitatore TORX da contrangolo

- Realizzato in acciaio
- Per tutte le viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione

Lunghezza	Tipo	Codice
25 mm	Torx	CATXC
30 mm	Torx	CATXM



Avvitatore TORX da cricchetto

- Realizzato in acciaio
- Per tutte le viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione

Lunghezza	Tipo	Codice
23 mm	Torx	CRTXC
31 mm	Torx	CRTXM



Cacciavite manuale TORX

- Realizzato in acciaio
- Per tutte le viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione

Lunghezza	Tipo	Codice
21 mm	Torx	DRTXC
25 mm	Torx	DRTXM



Avvitatore per impianto da contrangolo

- Realizzato in acciaio
- Indicato per proseguire l'avvitamento dell'impianto con il cricchetto

Tipo	Codice
20 mm	CAC-I
25 mm	CAM-I



Avvitatore da cricchetto

- Realizzato in acciaio
- Indicato per proseguire l'avvitamento dell'impianto con il cricchetto

Tipo	Codice
18 mm	CRC-I
25 mm	CRM-I



Avvitatore da contrangolo

- Realizzato in acciaio

Tipo	Codice
21 mm	W-CACC-I
25 mm	W-CAC-I
28 mm	W-CAM-I
21 mm	W-CATCC-I
25 mm	W-CATC-I
28 mm	W-CATM-I



Avvitatore da cricchetto

- Realizzato in acciaio
- Indicato per proseguire l'avvitamento dell'impianto con il cricchetto

Tipo	Codice
12,5 mm	W-CRCC-I
18 mm	W-CRC-I
25 mm	W-CRM-I
12,5 mm	W-CRTCC-I
18 mm	W-CRTC-I
25 mm	W-CRTM-I



Avvitatore per MUA dritti da contrangolo

- Realizzato in acciaio
- Per l'avvitamento di monconi MUA dritti con manipolo

Lunghezza	Tipo	Codice
23 mm	HEX	CAC-MD



Avvitatore per MUA dritti da cricchetto

- Realizzato in acciaio
- Per l'avvitamento di monconi MUA dritti con cricchetto.

Lunghezza	Tipo	Codice
19 mm	TORX	CRC-MD



Chiave a cricchetto

- Realizzata in acciaio
- Da usare in combinazione con i connettori "CR" connessione esagonale da 3,5 mm

Lunghezza	Codice
80 mm	CRCH



Cacciaviti protesici			
Codice	Tipo	Dimensione	
CATXM	CONTRANGOLO	LUNGO	TORX
CRTXM	CRICCHETTO	LUNGO	TORX
DRTXC	MANUALE	CORTO	TORX

Only One	
Codice	Tipo
CAC-I	CONTRANGOLO CORTO
CRM-I	CRICCHETTO LUNGO

Conex - K			
Codice	Tipo	Dimensione	
W-CAC-I	CONTRANGOLO	CORTO	SPI
W-CATC-I	CONTRANGOLO	CORTO	MPI
W-CRM-I	CRICCHETTO	LUNGO	SPI
W-CRTM-I	CRICCHETTO	LUNGO	MPI

Stop frese		
Codice	Ø	H
ST4006	4	6
ST4008	4	8,5
ST4010	4	10
ST4011	4	11,5
ST4013	4	13
ST4806	4,8	6
ST4808	4,8	8,5
ST4810	4,8	10
ST4811	4,8	11,5
ST4813	4,8	13

Strumenti	
Codice	Tipo
CONV-CA-CR	CONVERT. CONTRANGOLO A CRICCHETTO
CRCHD	CHIAVE DRITTA
CRCHM	CHIAVE DIGITALE MANUALE
PFR	PROLUNGA PER FRESE
PPL	PIN PARALLELISMO





Kit chirurgico

“Da qui prende voce
la passione...”

Kit chirurgico | Praticità e comfort


Per un flusso di lavoro semplice

Un kit organizzato per lasciare la massima libertà al clinico.
Un flusso di lavoro semplice e protocollato.
La scelta tra preparazione con osteotomi magneto-dinamici senza diminuzione ossea resettiva, nel pieno rispetto dell'anatomia.

Il massimo della funzionalità e praticità in una trousse completa suddivisa in due scomparti facilmente accessibili.



Kit chirurgico | Specifiche

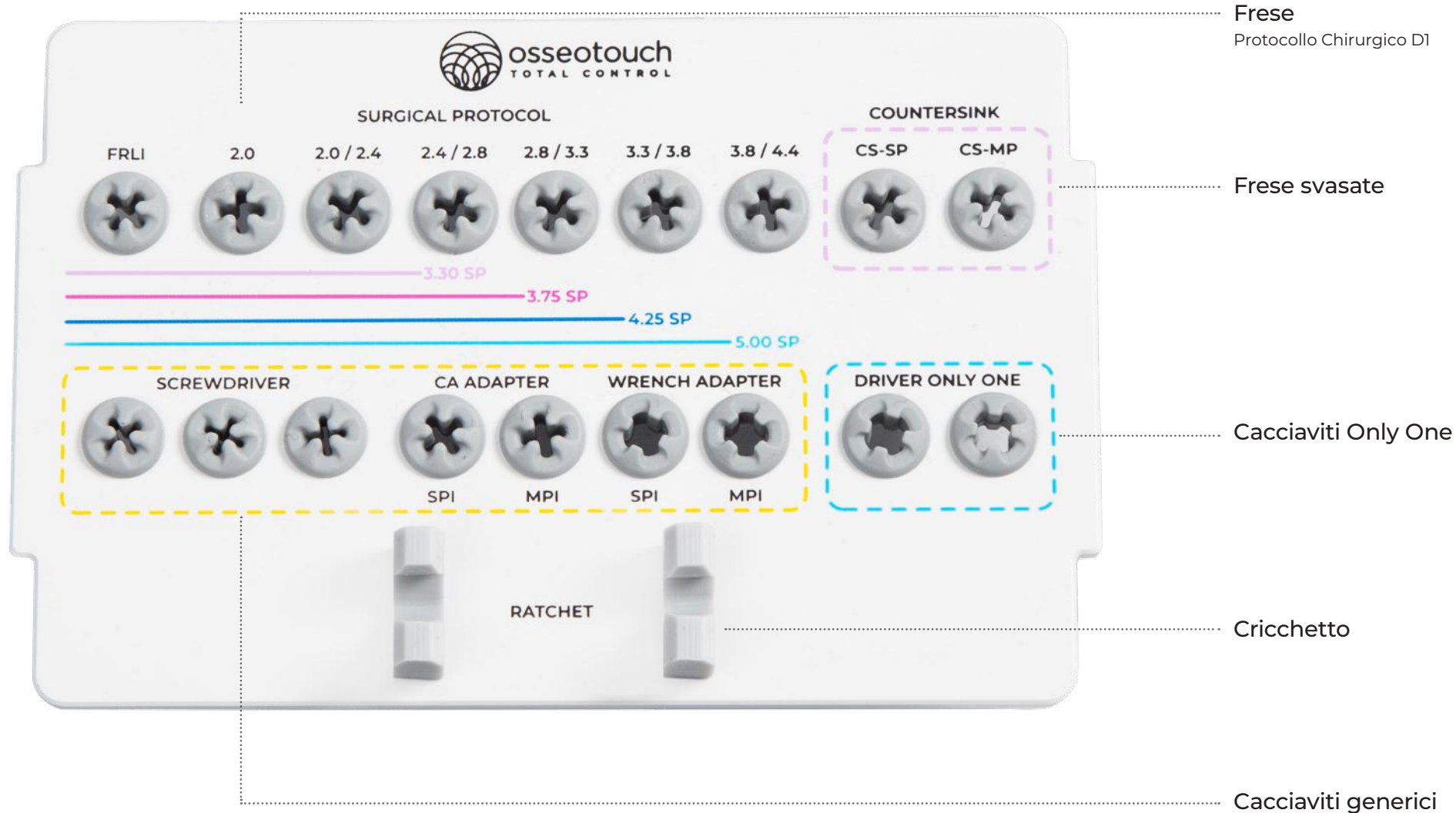





“Sette note, cinque
osteotomi e quattro
densità ossee...
Musica Maestro!”

Protocollo

Pratico e concreto

Un solido protocollo chirurgico che possa prendere in considerazione le varie configurazioni e morfologie ossee nella direzione della semplificazione. Dare la possibilità al clinico di una scelta chirurgica in piena libertà, preservando le strutture ossee o modificandole in base alle esigenze implantari.

Perchè Black Ruby?

La geometria di Black Ruby con punta a doppia conicità facilita l'ingresso all'interno dell'osso garantendo uno shaping d'eccellenza e preservando l'osso al 100%. Il rivestimento nero in DLC, oltre a renderli esteticamente accattivanti, aiuta lo scivolamento all'interno dell'osso riducendo l'attrito con esso.

La preparazione del sito implantare, mai come con Black Ruby, risulta semplice, predicibile e ripetibile.

[Scarica le Quote Black Ruby](#)




Protocollo per impianti Conex - K e Only One

Conex - K


Osso D4 | Ø 3,3

BLACK-RUBY 1

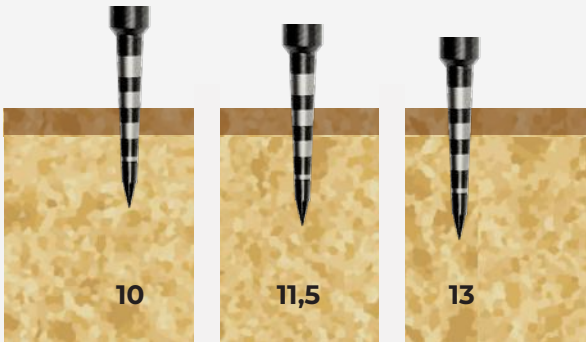


Osso D4 | Ø 3,75

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3

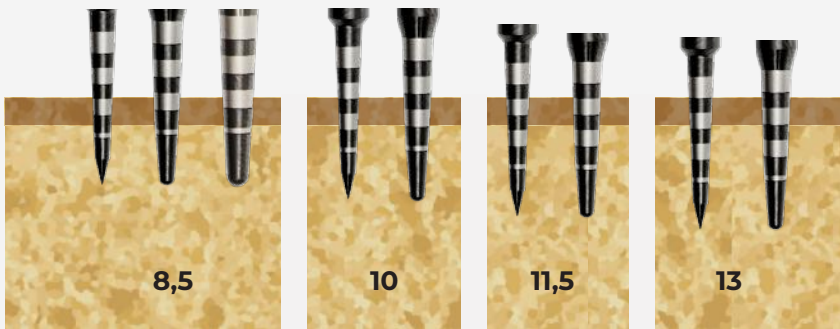


Osso D3/D2 | Ø 3,3

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2

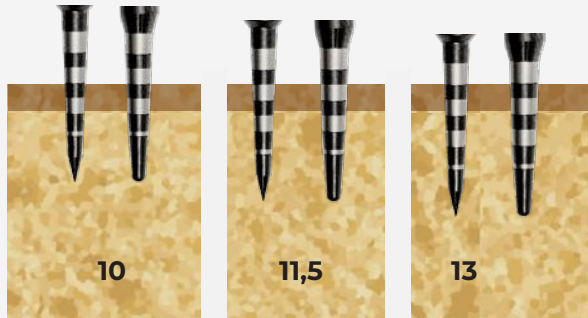






Osso D3/D2 | Ø 3,75

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3
BLACK-RUBY 4

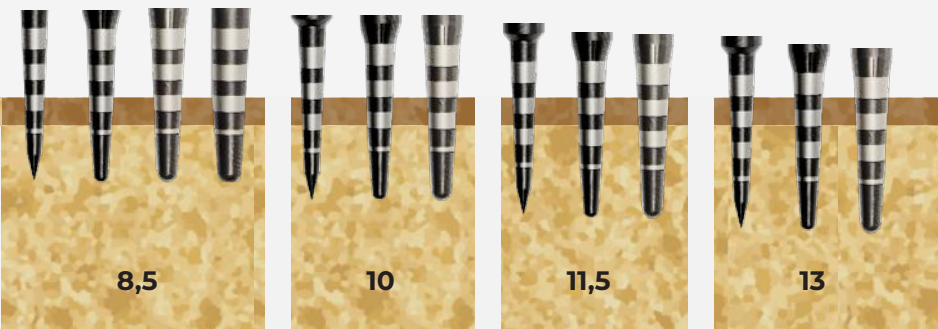






Osso D4 | Ø 4,25

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3
BLACK-RUBY 4

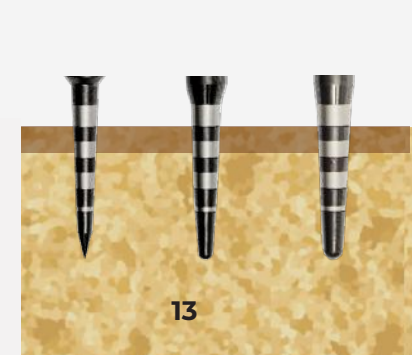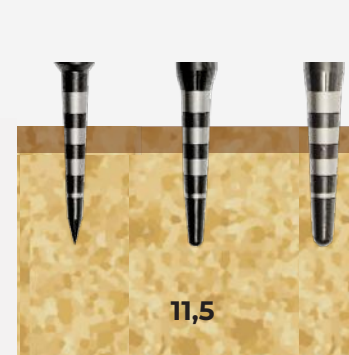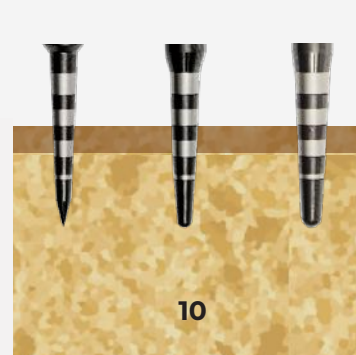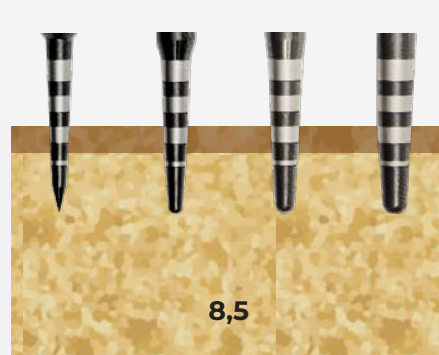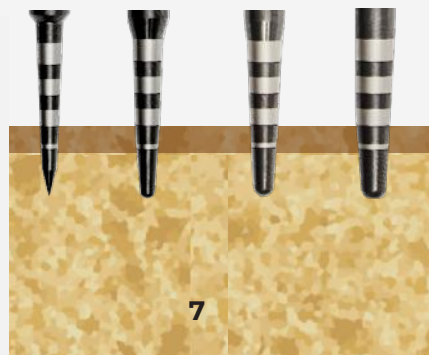

Osso D3/D2 | Ø 4,25

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3
BLACK-RUBY 4
BLACK-RUBY 5

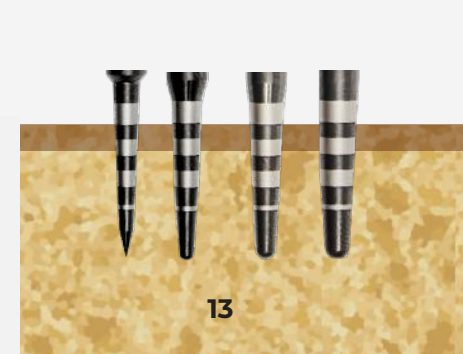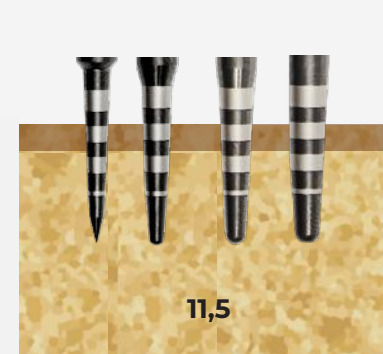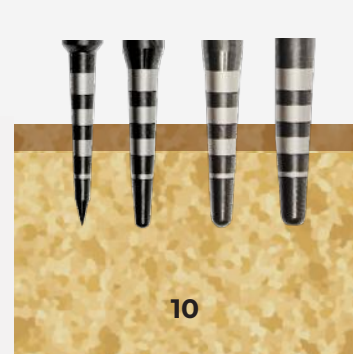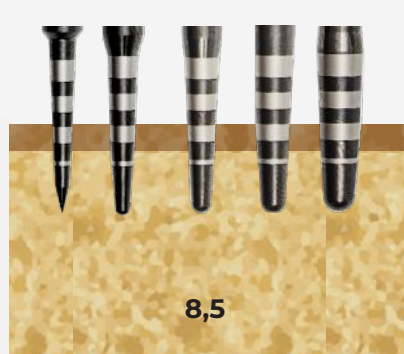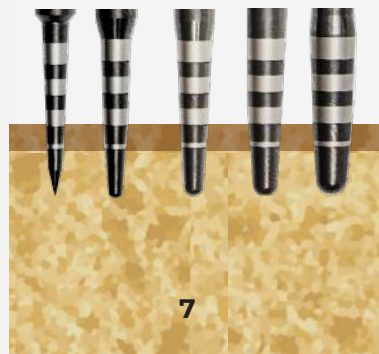

Osso D3/D4 | Ø 5





BLACK-RUBY 1

BLACK-RUBY 2

BLACK-RUBY 3

BLACK-RUBY 4

BLACK-RUBY 5

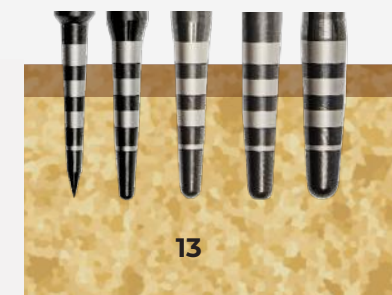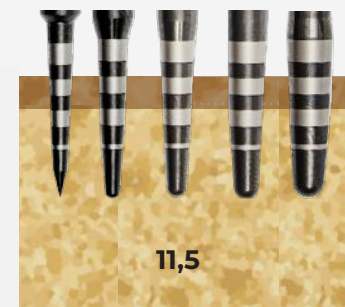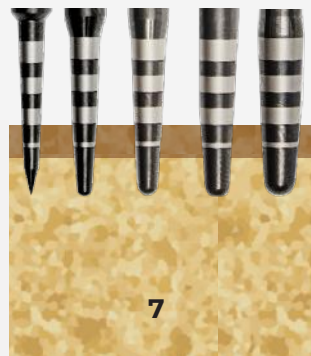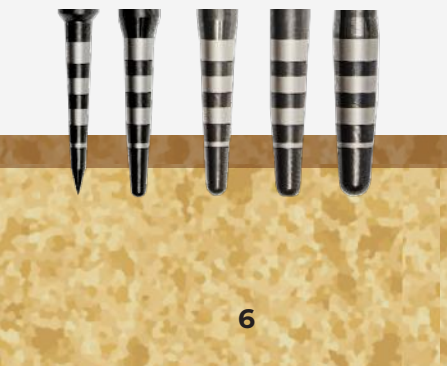


Protocollo in Osso D1 per impianti Conex - K e Only One

Conex - K


Osso D1 | Ø 3,3

- FRESA A LANCIA °
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- CS-SP

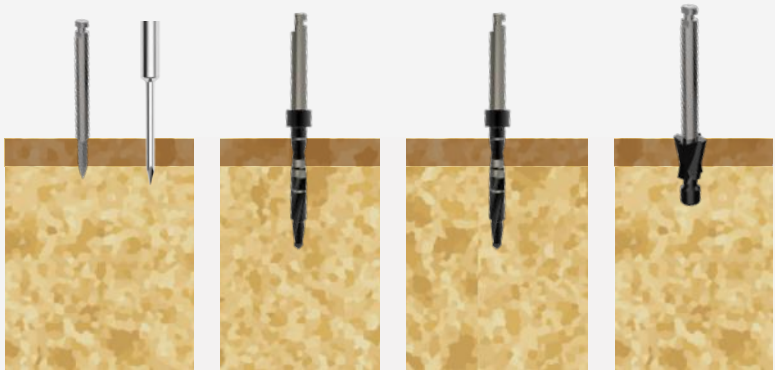

Osso D1 | Ø 3,75

- FRESA A LANCIA °
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- FR2428
- CS-MP

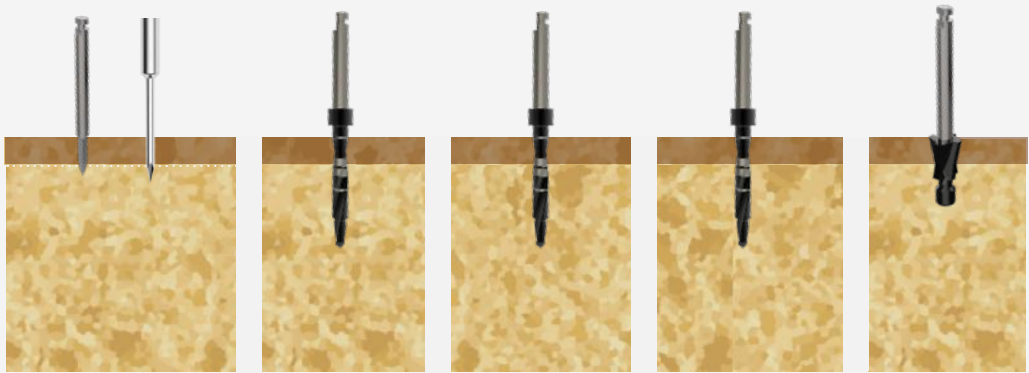


Protocollo in Osso D1 per impianti Conex - K e Only One

Conex - K


Osso D1 | Ø 4,25

- FRESA A LANCIA Ø
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- FR2428
- FR2833
- FR3338
- CS-MP

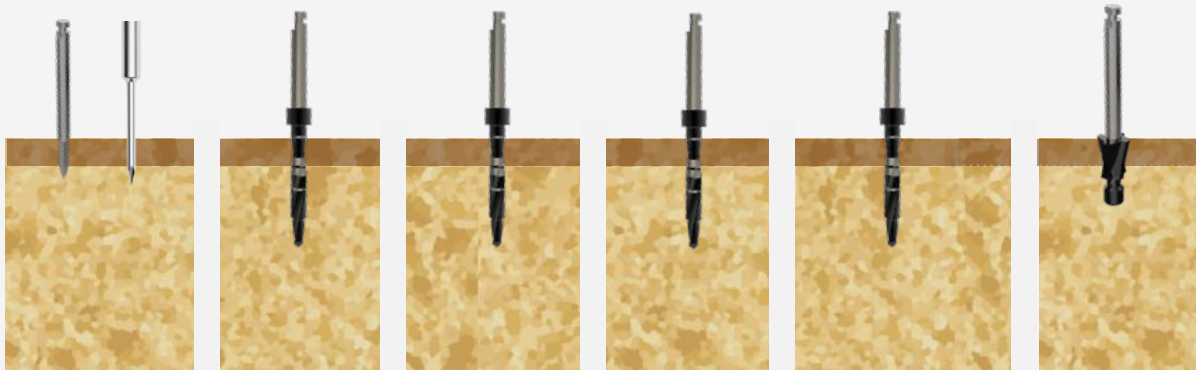

Osso D1 | Ø 5

- FRESA A LANCIA Ø
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- FR2428
- FR2833
- FR3338
- FR3844

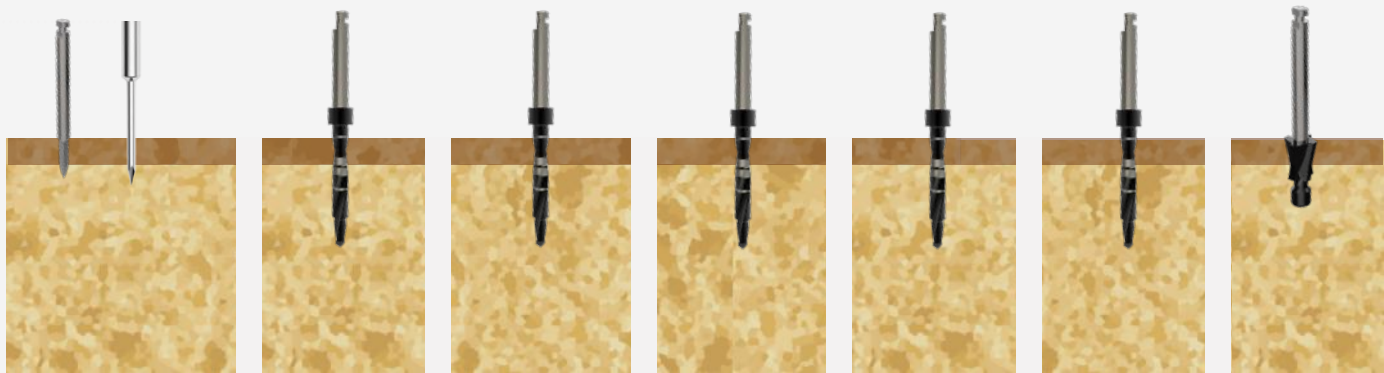


Protocollo per impianti Conex - K e Only One

Only One

Osso D4 | Ø 3,3


BLACK-RUBY 1

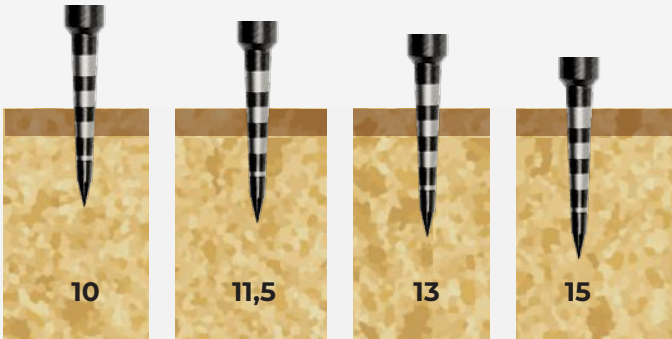

Osso D3/D2 | Ø 3,3

BLACK-RUBY 1

BLACK-RUBY 2

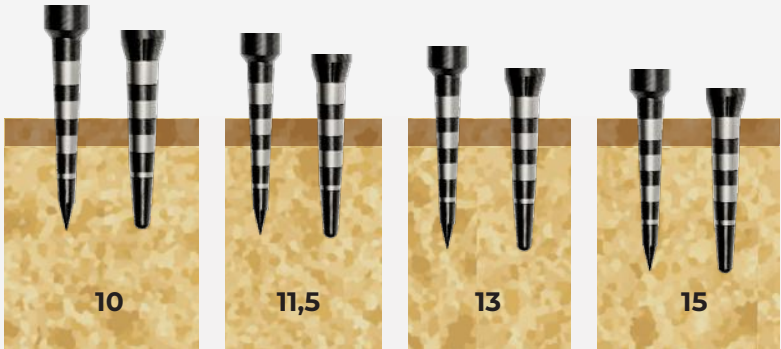

Osso D1 | Ø 3,3

FRESA A LANCIA Ø

FIRST

FR2024

FR2428



Protocollo per impianti Conex - K e Only One

Only One

Osso D4 | Ø 4

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2




Osso D3/D2 | Ø 4

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3



Osso D1 | Ø 4

FRESA A LANCIA Ø
FIRST
FR2024
FR2428
FR2833

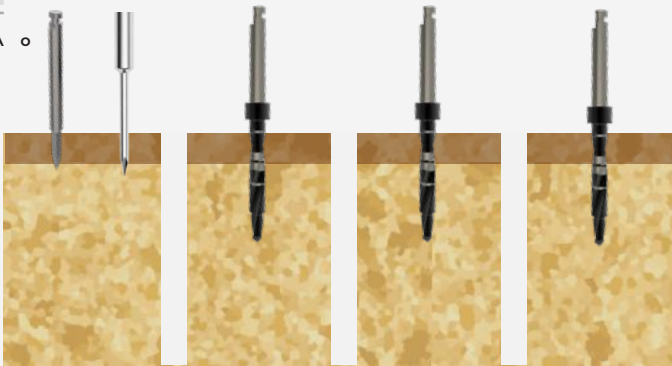






“Da qui prende voce la
passione...”

Kit chirurgia guidata

Magneto dinamica guidata

I vantaggi della pianificazione guidata con l'ausilio della tecnologia magneto dinamica rende il flusso di lavoro più semplice e intuitivo.

Il Kit Dynamic Guided, mediante il software, riesce a fornire risultati semplici e predicibili permettendo un risparmio di tempo e aumentando la precisione chirurgica nel pieno rispetto delle strutture ossee.

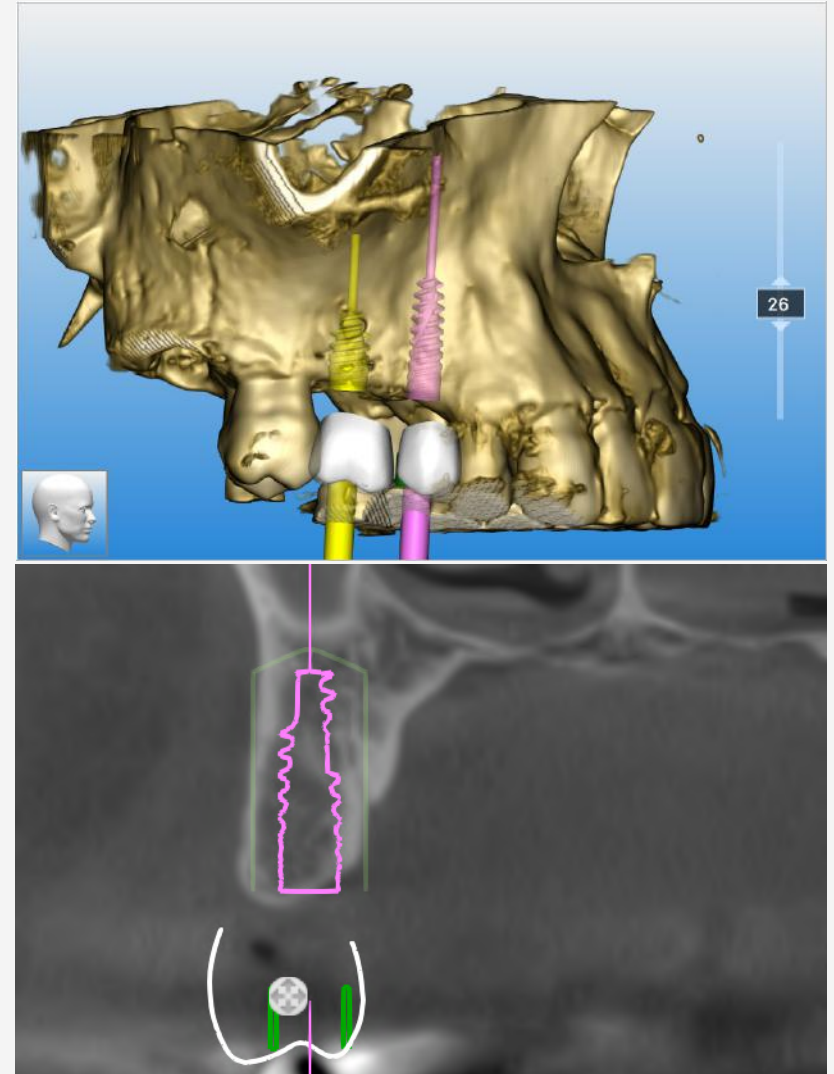

Chirurgia Guidata | Specifiche





Progettazione guidata

“L’idea è progetto...
progetto e idea
diventano arte”

Chirurgia guidata magneto dinamica



L'applicativo più utilizzato al mondo per la diagnostica 3D al servizio della tecnologia magneto dinamica. Real Guide™ offre tutto ciò che serve per una pianificazione precisa e un posizionamento predicibile.

Dalla progettazione alla realizzazione della dima fino all'esecuzione della chirurgia con l'ausilio del nuovo dynamic surgery kit e i dei suoi osteotomi dedicati alla chirurgia guidata.

Non hai il software? Scaricalo da [qui](#).

Contatti

www.osseotouch.com
contact@osseotouch.com
0331 15 35 586
329 744 3204

Indirizzi

DISTRIBUTORE ITALIA
OSNRGY S.r.l
Piazza Garibaldi 9
Gallarate (VA) 21013
Italia

Seguici su

