




osseotouch
TOTAL CONTROL

CHIRURGIA GENERALE

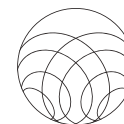

osseotouch
TOTAL CONTROL

CHIRURGIA GENERALE

- **Company profile** 005
- **Tecnologia magneto dinamica** 006
- **Vantaggi della tecnologia magneto dinamica** 007
- **Magnetic Mallet** 008
- **Kit All-in** 011
- **Easyroot** 030
- **Strumenti Chirurgici** 034
- **Suture** 050
- **Suture - Best of** 052
- **Motore Planter Led** 053

Company profile

Osseotouch è una società composta da un team di professionisti dedicati alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per rivoluzionare e semplificare la chirurgia orale. La nostra missione è migliorare l'esperienza degli interventi sia per gli operatori che per i pazienti, grazie al nostro brevetto magneto dinamico. Siamo focalizzati sull'innovazione e la facilità d'uso, con l'obiettivo di offrire comfort e praticità senza precedenti.

Siamo una realtà dinamica con una forte vocazione internazionale. Le nostre idee e brevetti sono il fulcro della nostra attività, arricchiti dalla collaborazione clinica con medici di fiducia.

Come azienda italiana, sviluppiamo brevetti e dispositivi con la tecnologia più avanzata disponibile nel settore dentale: la magneto dinamica. Distribuiamo il nostro Magnetic Mallet ed Easyroot, insieme a una vasta gamma di strumenti chirurgici, per accompagnare e supportare i chirurghi in una pratica quotidiana sempre più intuitiva, semplice e predicibile.



Meta Ergonomica, con sede a Turbigo (MI), Italia, ha sviluppato e brevettato l'uso delle forze magneto dinamiche in chirurgia orale. Il suo obiettivo è progettare e fabbricare dispositivi medici che consentono l'attuazione di procedure in modo controllato, preciso e conservativo.

Meta Ergonomica è un'azienda certificata secondo gli standard ISO13485:2016 da Tuv Rheinland S.r.l. (1936) con certificato ICIM-13485-050738-00 e registrata secondo gli standard FDA. Certificazione MDR UE 2017/745.

Tecnologia magneto dinamica

La tecnologia magneto dinamica si basa sull'innovativo concetto di accelerazione, riducendo i tempi di impatto e massimizzando sia la forza che l'efficacia. Attraverso il magnetismo possono essere generati gli intervalli di forza e accelerazione necessari per eseguire chirurgie mini-invasive con successo. Il controllo preciso e costante delle forze è fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori durante le procedure. Grazie alla potenza controllata, è possibile gestire i tessuti in modo sicuro, rapido e minimamente invasivo. Osseotouch si impegna a collaborare esclusivamente con partner certificati di prim'ordine all'interno di un network dedicato all'innovazione e alla produzione continua di nuove idee. Attraverso questa collaborazione, l'azienda si espande sia a livello globale che in nuovi settori, portando l'eccellenza italiana in tutti e cinque i continenti.



Vantaggi della tecnologia magneto dinamica

Velocità

La propulsione magneto dinamica applica più forza rispetto agli strumenti manuali, garantendo più efficacia nell'operazione.

Visibilità

La mancanza di irrigazione aumenta la visibilità dell'operatore, in grado di controllare la progressiva penetrazione dello strumento.

Precisione

Le forze sono focalizzate nell'area trattata limitando al massimo la loro dispersione, generando più comfort per il paziente e totale accuratezza nella procedura.

Controllo

In qualsiasi procedura le forze sono applicate con grande precisione, assicurando un totale controllo da parte dell'operatore.

Zero taglio

Muove, rimpiazza, riforma, condensa, senza mai rimuovere l'osso, lasciando intatti i tessuti molli.

Direzionalità

L'ergonomia del manipolo permette l'utilizzo con una sola mano e facilita il posizionamento nell'area da trattare.

Freddo

Il Magnetic Mallet riduce in maniera sostanziale la generazione del calore per cui non è necessario irrigare.

Versatilità

Molteplici funzioni con lo stesso manipolo utilizzando sempre la forza necessaria per ogni procedura grazie a un elevato grado di progressività.



magnetic

M A L L E T

Magnetic Mallet | Semplice, intuitivo, completo



cm 25

peso Kg 4,7

Un dispositivo compatto, maneggevole e rapido da preparare per le tue chirurgie. L'unico comando è il selettore di potenza, che va da 1 a 4.



cm 11

cm 23

Magnetic Mallet è prodotto da: **Meta Ergonomica S.r.l.**
Via Monte Nero 19, 20029 Turbigo (MI), Tel: 0331 890280



Due soli connettori, uno per il manipo e uno per il pedale. Pulsante di back up per attivare l'impulso in alternativa al pedale.



Magnetic Mallet | Manipolo plus

Potenza amplificata, maggiore efficacia

Il manipolo Plus è incluso in ogni configurazione del Magnetic Mallet. Sfrutta al massimo la tecnologia magneto dinamica con una potenza amplificata. Possibilità di effettuare l'upgrade da manipolo standard a plus.





Kit All-in

Essenziali per ogni intervento odontoiatrico

Comodi, pratici e modulari per un'esperienza chirurgica ottimizzata.

Kit Extraction 5 | Cinque strumenti per le avulsioni



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

Design studiato per disporre della geometria migliore per ogni estrazione

Kit ideale per l'avulsione atraumatica di tutti gli elementi dentali. Kit composto da 5 estrattori curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Estrattore 3S – Ripensato grazie al feedback degli utenti, questo innovativo strumento presenta un'angolazione inversa, rendendolo ancora più efficace nel raggiungere lo spazio tra il moncone e il dente. Un piccolo cambiamento, un grande salto in prestazioni.



Kit Expander 5 | Cinque strumenti a spessore progressivo



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

A larghezze progressivamente maggiori, con tacche di profondità ben visibili

Kit incrementale per l'espansione orizzontale di cresta.
Kit composto da 3 espansori + CUT + SPLIT curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Kit Expander Plus 8 | Otto strumenti a spessore progressivo con lame GENOA



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

Per le creste più sottili

Kit progressivo per l'espansione di creste con severo riassorbimento, partendo dalla split effettuata con strumenti Genoa taglienti.

Il kit è composto da 3 espansori, il CUT, la SPLIT e un set Genoa curvo con manico offset adatto sia per settori posteriori che anteriori.



Kit GENOA 3 | Tre lame per un invito in sicurezza



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

Per le creste più sottili

Kit per l'espansione orizzontale della cresta. Le precise lame GENOA consentono di creare in sicurezza un invito anche nelle creste più sottili. Gli osteotomi curvi, dotati di manico offset, sono adatti sia per settori posteriori che anteriori.




Kit Osteotomi 7 | Per la preparazione del sito implantare e sinus lift



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

A larghezze progressivamente maggiori, con tacche di profondità ben visibili

Kit concepito per l'osteocondensazione e la preparazione implantare a punta piatta, utilizzabile anche per rialzi del seno o tecnica LMSF. Kit composto da sette osteotomi con misure differenti, curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.

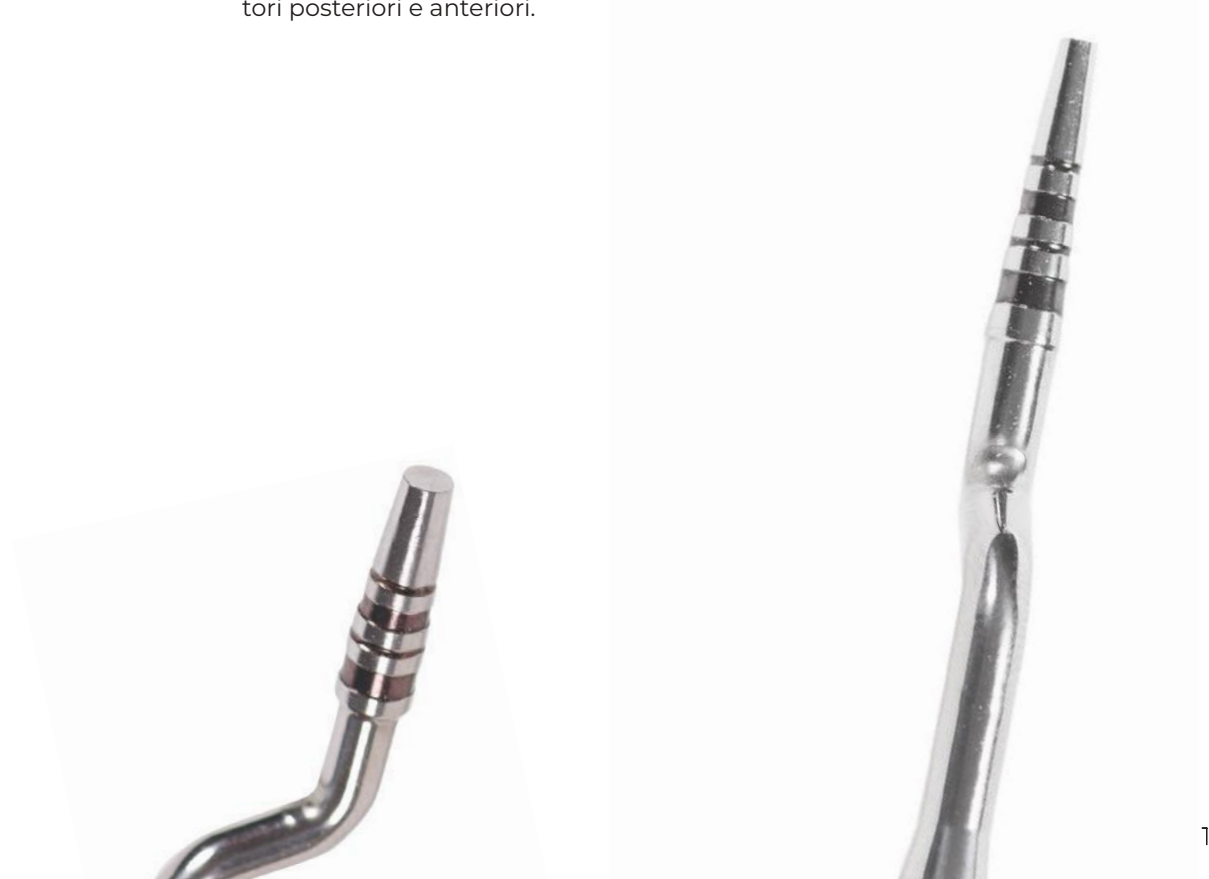

Kit Infinity 12 | Ancora più libertà d'azione



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.


5 Leve per l'estrazione e 7 osteotomi per diversi diametri implantari

Questo set è dotato di 12 strumenti del Magnetic Mallet per un'efficace preparazione del sito implantare, offrendo una soluzione completa per interventi odontoiatrici sicuri e precisi.

Kit composto da sette osteotomi e cinque estrattori con misure differenti, curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Kit Easy in 6 | Per la gestione del mascellare inferiore

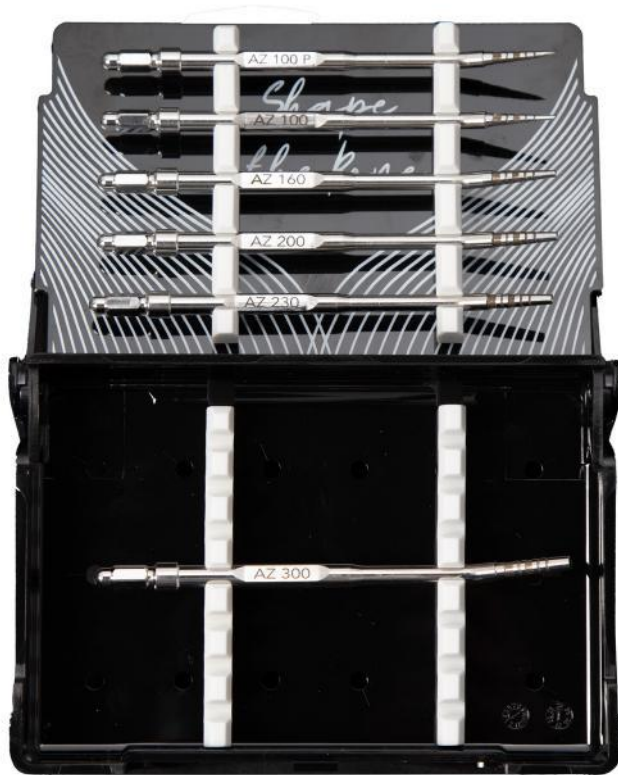

Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

Massima distrazione del tessuto osseo, minima compattazione

Kit osteotomico con bordo tagliente e la superficie concava, favorisce la movimentazione ossea.

Kit composto da sei osteotomi offset o curvi o a 20° particolarmente indicati per la chirurgia mandibolare.



Kit Black Ruby 5 | Con rivestimento in DLC



Kit in radel opzionale (consigliato per un numero massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è riordinabile singolarmente.

Per un minor attrito

Kit con coating DLC che rende lo strumento più scivoloso e atraumatico per la preparazione implantare e il piccolo rialzo del seno mascellare. Osteotomi curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Kit Chirurgia Implantare | Per un flusso di lavoro semplice



L'ideale per l'implantologia moderna

La scelta tra la preparazione con osteotomi magnetico dinamici senza necessità di riduzione ossea, avviene nel totale rispetto dell'anatomia. Offriamo il massimo della funzionalità e della praticità in una trousse completa, suddivisa in due scomparti facilmente accessibili.

Composto da sette frese per la preparazione, quattro avvitatori manuali da contrangolo, cricchetto chirurgico e Black Ruby (opzionale).



Kit Dynamic Guided | L'unico kit di chirurgia guidata osteotomica al mondo



Il futuro dell'implantologia

Kit ideale per la chirurgia guidata adattabile a molteplici linee implantari. Composto da 5 osteotomi, 5 stop millimetrati, 1 avvitatore, 2 mounter e 2 driver, boccole. Anche in versione PRO per la linea implantare Osseotouch. Osteotomi curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Kit PT-1 | Il primo impianto pterigoideo per la tecnologia Magneto Dinamica



Implantologia Magneto Dinamica pterigoidea

Kit per la chirurgia pterigoidea. Composto da tre driver per contrangolo e manuali, una chiave dinamometrica, due frese pterigoidee, due pin. Osteotomi dritti.



Kit Elevate | Il kit definitivo per il rialzo di seno crestale



Tradizione e tecnologia Magneto Dinamica

Kit ideato per il rialzo del seno mascellare dotato di stop millimetrati per una sicura procedura clinica. Kit composto da 5 osteotomi Elevate e 13 stop millimetrati. Box in radel. Osteotomi curvi con manico offset adatto per settori posteriori e anteriori.



Kit Combo total black | Rialzo del seno e preparazione implantare



Dai mini rialzi ai più complessi

Il kit che permette di sfruttare la magneto dinamica per il rialzo del seno crestale e la preparazione implantare. Kit composto da cinque osteotomi Elevated e cinque Black Ruby curvi con manico offset, adatto per settori posteriori e anteriori e tredici stop millimetrati.



BlexoPathfinder Kit | Gestire le fratture radicolari



Kit Radel opzionale (consigliato per un massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è ordinabile singolarmente.

Precisione alla punta

Pathfinder Blexo è un set di strumenti ultrafini progettati per gestire estrazioni complesse, come fratture radicolari o spazi anatomici ristretti. Questi strumenti di alta precisione offrono un controllo ottimale per navigare tra le punte radicolari e segmenti fragili, senza compromettere i tessuti circostanti. In sinergia con il Magnetic Mallet, Pathfinder consente un intervento chirurgico preciso per eseguire estrazioni minimamente invasive e prevedibili. Il set include 4 strumenti: Slim, Arc, Micro e Longroot, ideali per estrazioni delicate.



Blexo AngleFit Kit | Dominio di ogni quadrante



Kit Radel opzionale (consigliato per un massimo di dodici strumenti). Ogni strumento è ordinabile singolarmente.

Leva professionale per estrazioni superiori

Blexo AngleFit è un set di quattro leve specifiche per ciascun quadrante, progettate con angolazioni precise per i segmenti superiori e inferiori. Offrono una leva e un controllo senza pari, ideali per estrazioni dentali complesse. Progettato per integrarsi perfettamente con il sistema Magnetic Mallet, AngleFit massimizza l'efficienza dell'estrazione indirizzando ogni quadrante dentale con precisione ergonomica. Questo approccio garantisce un trauma minimo per il paziente e procedure più rapide, raggiungendo il più alto livello di performance estrattiva fino ad oggi. Il kit include 4 strumenti con angolazioni diverse per un accesso completo a ogni radice da tutti i lati.



Kit Easy pin | Inserimento dei pin per il fissaggio delle membrane semplificato e controllato



Precisione e sicurezza

La dotazione Easy-Pin permette di sfruttare la magneto dinamica per inserire i pin in maniera veloce e accurata. La dotazione prevede il box chirurgico, lo strumento (INSEP) da applicare al manipolo e i pin disponibili in 2 lunghezze diverse.

PRODOTTO	DESCRIZIONE
Kit in radel	Comprensivo di punte e osteotomo
PIN per EASY-PIN	Confezione contenente 5 pin misura 3.1
PIN per EASY-PIN	Confezione contenente 5 pin misura 3.5

Kit Levacorone | Rimuove ponti e corone con l'ausilio della Magneto Dinamica



Efficace, veloce, sicuro

Un manipolo che sfrutta la potenza e il controllo della magneto dinamica per sviluppare una trazione perfettamente longitudinale che permette di togliere ponti e corone in tempi ridottissimi. Kit corredato da tre punte.



First | Per chirurgie completamente drills-free



Perfetto ingaggio della cresta

La punta lanceolata dello strumento permette di gestire anche le corticali più rappresentate, evitando del tutto l'utilizzo di frese. In questo modo, diventa molto più semplice determinare l'asse dell'osteotomia, anche in presenza di creste sottili, potendo mantenere la traiettoria in maniera sicura e predicibile.

First può essere aggiunto ad ogni Kit o può essere acquistato singolarmente.



The image features a white and teal Easyroot ultrasonic scaler unit on the left. A teal handpiece is connected to the unit and is shown in a position as if it is about to be used on a tooth. The handpiece has the 'easyroot' brand name and 'AUTOClave 99.0300.001' printed on it. A teal cable runs from the unit to the handpiece. The background is a solid dark teal color.

easyroot

Easyroot | Per estrazioni atraumatiche e mini-invasive



Un dispositivo magneto dinamico compatto e intuitivo per eseguire ideato per la chirurgia estrattiva: 2 potenze e 6 strumenti a disposizione.

Easyroot è la soluzione migliore per approcciare la tecnologia Magneto Dinamica utilizzandola quotidianamente.



Easyroot è prodotto da: **Meta Ergonomica S.r.l.**
Via Monte Nero 19, 20029 Turbigo (MI), Tel: 0331 890280

Xpel
Ad inclinazione
variabile



3 Estrattori dalla precisione unica

Gli strumenti per le avulsioni permettono di gestire anche i casi più complessi senza intaccare i tessuti molli e lavorando a sottrazione zero. Le geometrie sono state studiate per facilitare l'inserimento tra la radice e l'alveolo mobilizzandola in maniera del tutto atraumatica. Dotazione composta da due estrattori e osteotomo Xpel, curvi con manico offset adatto per posteriori e anteriori.



Estrattori | Extension pack



3 Estrattori dalla precisione unica

Include due strumenti ottimali per l'estrazione degli ottavi e un terzo strumento per l'estrazione di radici curve particolarmente difficili. Dotazione composta da tre estrattori curvi con manico offset adatto per posteriori e anteriori.



Strumenti Black

Genio italiano acciaio tedesco

Osseotouch distribuisce strumenti chirurgici realizzati esclusivamente con acciaio tedesco: qualità superiore senza alcun compromesso sul design. Ergonomia e comfort grazie al coating soft touch, ideato e testato dall'eccellenza dell'odontoiatria italiana.

* Non disponibile per tutti i paesi

Strumenti Black | Coating soft touch per un'ergonomia superiore



OSDOB04-B

Divaricatore **Obwegeser** mm. 55x12 cm. 22. Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.



OSDAI03-B

Divaricatore allarga guancia intraorale cm. 11. Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente. Ottimo per la documentazione fotografica.



OSDIM02-B

Divaricatore **Minnesota** cm. 14. Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente. Per labbra e guance. Ottimo per la documentazione fotografica.

Strumenti Black | Coating soft touch per un'ergonomia superiore



OSPAR11-B

Pinzetta anatomica retta cm. 17,5.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.



OSMPM10-B

Manico portalame per microchirurgia cm. 13,5.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente. Corredato di grip dentellato per una migliore presa.



OSMBA09-B

Manico portalame per chirurgia cm. 13,5.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente. Corredato di grip dentellato per una migliore presa.

Strumenti Black | Coating soft touch per un'ergonomia superiore



OSSPM07-B

Scollaperiostio **Molt** punta a baionetta cm. 18.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.
Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.



OSCCM06-B

Curette chirurgica **Molt** cm. 18.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.
La parte lavorante viene esclusa dal coating per salvaguardare la prestazione dello strumento.
Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.



OSSGF05-B

Scollaperiostio **Goldman-Fox Williams** cm. 18.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.
La parte lavorante viene esclusa dal coating per salvaguardare la prestazione dello strumento.
Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.

Strumenti Black | Coating soft touch per un'ergonomia superiore



OSDOB08-B

Sonda doppia **Goldman-Fox Williams** cm. 18.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente. Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.



OSSTF12-B

Siringa Tubo Fiala 3 anelli.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.



OSFIR14-B

Forbici **Iris** per chirurgia autoaffilanti.
Ideali per effettuare tagli e rimuovere suture. Super-taglio. Con tungsteno.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.

Strumenti Black | Coating soft touch per un'ergonomia superiore



OSPCM13-B

Porta aghi **Crile Murrey** cm. 15.
Con sistema di chiusura a zip.
Rivestimento nero soft-touch che conferisce un migliore comfort al paziente.





Strumenti in acciaio

Genio italiano acciaio tedesco

Osseotouch distribuisce strumenti chirurgici realizzati esclusivamente con acciaio tedesco: qualità superiore senza alcun compromesso sul design.

* Non disponibile per tutti i paesi

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSSCE04

Scollaperiostio / Scollatore Endostale N.2 cm. 16.
Acciaio chirurgico made in Germany.
Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.



OSSPF13

Scollaperiostio **Freer** cm. 18.
Acciaio chirurgico made in Germany.
Corredato di grip per facilitare movimento rotatorio.



OSSPP03

Scollaperiostio **Prichard** cm. 18.
Acciaio chirurgico made in Germany.
Corredato di grip dentellato per una migliore presa.

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSLIG16

Luxating elevator angolata in cm. 16.
Leva per estrazione con impugnatura esaergonomica.



OSLOP17

Luxating elevator angolata out piccola cm. 16.
Microlussatore con impugnatura esaergonomica.



OSLER18

Luxating elevator retta piccola cm. 16.
Microlussatore, leva per estrazione con impugnatura esaergonomica.

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSLAI19

Luxating elevator angolata in piccola cm. 16.
Microlussatore, leva per estrazione con impugnatura
esaergonomica.



OSLAO20

Luxating elevator angolata in piccola cm. 16.
Microlussatore, leva per estrazione con impugnatura
esaergonomica.



OSLEB21

Luxating elevator a baionetta cm. 16.
Microlussatore, leva per estrazione con impugnatura
esaergonomica.

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSGOC08

Grattino per osso curvo, inox mm. 3 cm. 15,5.
Ideale per il prelievo di osso autologo, tagliente 3 mm,
lame intercambiabili. Acciaio chirurgico made in Ger-
many.



OSCAS10

Cannula per l'aspirazione in acciaio made in Germany.
Ø mm. 4 Lunghezza cm. 17.



OSSIM130

Siringa **ASA** per Biomateriali Ø mm. 3,5 cm. 16.
Iniettore di osso in Acciaio chirurgico made in Germany.

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSP CD12

Porta aghi **Micro Castroviejo** dritto TC cm. 14 con rinforzi in tungsteno dritti. Acciaio chirurgico made in Germany.



OSC AS10

Porta aghi **Crile-Wood** con rinforzi in tungsteno, lunghezza cm. 15.



OSP PA23

Pinzetta anatomica curva modello **Perry**, lunghezza cm. 12,5.

Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSPZM24

Pinzetta **College** con punte zigrinate, lunghezza cm. 15.



OSPPC22

Pinza curva per canali e rimozioni frammenti ossei/dentali cm. 13.



OSRAR01

Raspatore curvo **Roger** cm. 18.
Acciaio chirurgico made in Germany.
Corredato di grip dentellato per una migliore presa.



OSBOL09

Bacinella contenitore per osso con interno liscio, 35 mm.



CONTAINER1

Active Box coperchio forato mm. 300x140x70.
Sistema per la sterilizzazione garantito 1200 cicli con
filtro PTFE (codice: PTFEFILTER).
Non necessita di imbustamento. Per portare a livello
superiore la praticità e la sicurezza della sala operatoria.



PTFEFILTER

Filtro permanente PTFE 1200 cicli per container mini
dental – 215.


Strumenti in acciaio | Design ed ergonomia



OSTAS01

Tappeto in aghi di silicone mm. 260x120 per il posizionamento di ogni tipo di strumento chirurgico.



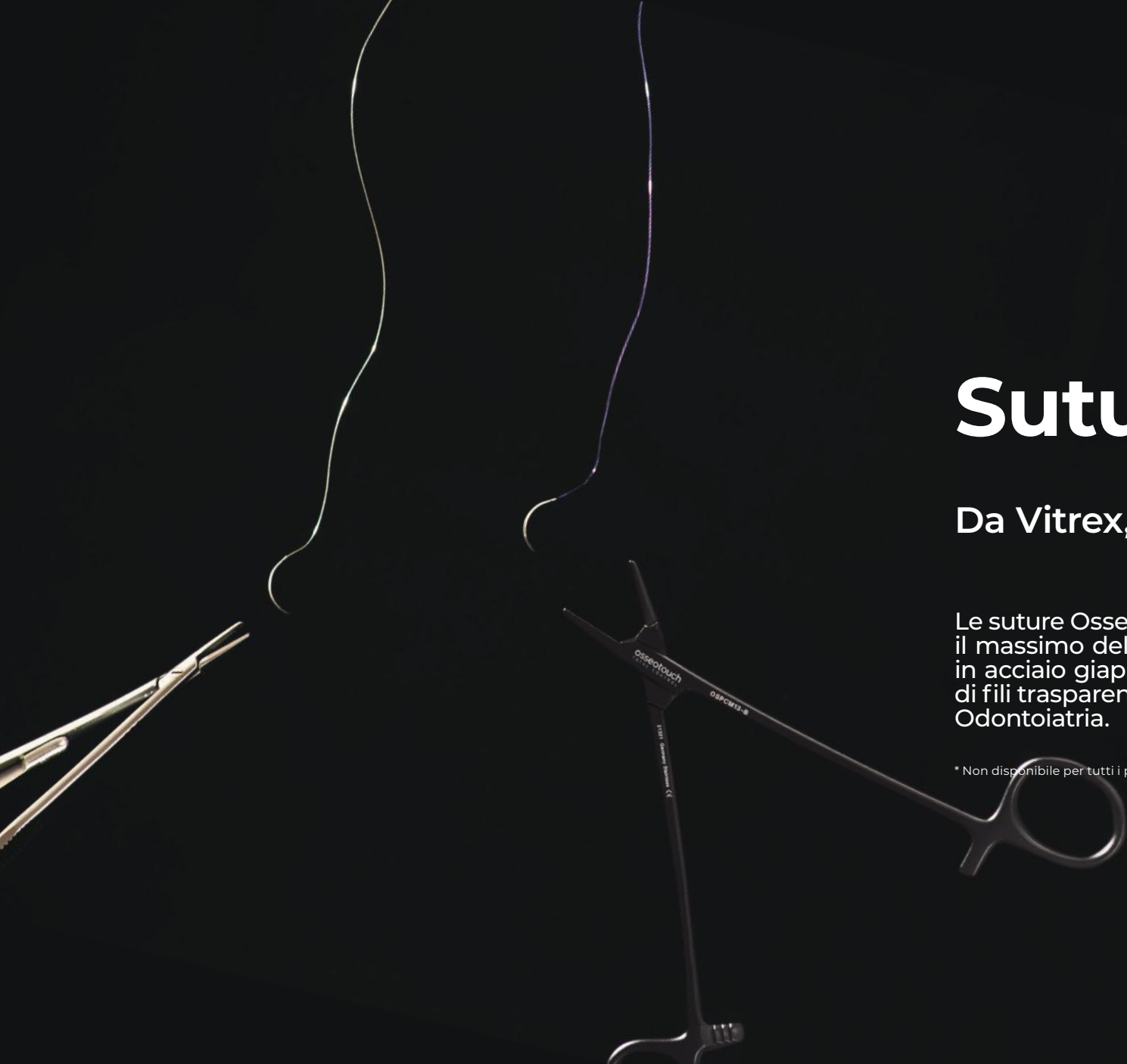

Suture

Da Vitrex, esclusiva Osseotouch

Le suture Osseotouch nascono per garantire mini invasività e il massimo della funzionalità: calibri sottili e sottilissimi, aghi in acciaio giapponese, fili riassorbibili e con una vasta scelta di fili trasparenti per la massima resa estetica per la moderna Odontoiatria.

* Non disponibile per tutti i paesi



MONOLAC MONOFILAMENT VIOLET

Assorbibile, monofilamento, sintetico, elevata resistenza alla trazione. Eccellente manipolabilità, cicatrizzazione a medio termine. Disponibile bianco per il massimo dell'estetica.

Composizione: Acido glicolico + Caprolactone



SILON MONOFILAMENT BLUE

Non assorbibile, monofilamento, sintetico, perfettamente liscio, eccellente annodabilità, facile da manipolare, perdita di resistenza alla trazione dopo l'impianto a lungo termine.

Composizione: Poliammide 6



TERVALON BRAIDED GREEN

Non assorbibile, multifilamento, sintetico, elevata resistenza alla trazione, senza effetto capillare, ben tollerato dai tessuti, basso attrito. Eccellente annodabilità.

Composizione: Poliestere



CHIRASORB BRAIDED VIOLET

Assorbibile (medio e rapido), multifilamento, rivestito, sintetico, elevata resistenza alla trazione, ridotto effetto capillare, cicatrizzazione a medio termine. Disponibile anche bianca per il massimo dell'estetica.
Composizione: Acido glicolico 90% + Acido L-lattico 10%



SILK BRAIDED BLACK

Non assorbibile, multifilamento, naturale, rivestito e siliconato, senza effetto capillare, perdita di resistenza alla trazione dopo l'impianto a lungo termine.
Composizione: Seta naturale



CHIRAFLOX MONOFILAMENT BLUE

Non assorbibile, multifilamento, scorrevolezza ottimale, eccellente annodabilità, elevata resistenza alla trazione. Nessuna scissione sotto sforzo considerevole.
Composizione: PVDF (polivinilidene fluoruro)

Codice	Materiale	Diametro filo	Lunghezza filo (cm)	Tipo di ago	Corpo Punta	Lunghezza ago
Chirasorb braided violet sutura riassorbibile in glycolide e L-lactide plurifilamento						
LV 0212	Chirasorb braided violet	3/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
LV 0211	Chirasorb braided violet	4/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
LV 0205	Chirasorb braided violet	5/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
LV 0201	Chirasorb braided violet	6/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	12
Monolac monofil violet sutura riassorbibile in glycolide e ε-Caprolactone monofilamento						
MV 0212	Monolac violet	3/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
MV 0211	Monolac violet	4/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
MV 0205	Monolac violet	5/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
MV 0201	Monolac violet	6/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	12
Silon monofil blue sutura non riassorbibile in poliamide monofilamento						
4021	Silon monofil blue	3/0	75	⅜ cerchio corpo cilindrico	DR	18
SM 2362	Silon monofil. blue	4/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
SM 2367	Silon monofil blue	4/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
SM 2056	Silon monofil blue	5/0	45	⅜ cerchio micropunta inverso	DSM	12
SM 2055	Silon monofil blue	6/0	45	⅜ cerchio micropunta inverso	DSM	12
Tervalon braided green sutura non riassorbibile in poliestere plurifilamento						
TG 4554	Tervalon braid. green	3/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
TG 4553	Tervalon braid. green	4/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
TG 4547	Tervalon braid. green	5/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
TG 4538	Tervalon braid. green	4/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	12
Silk braided black sutura non riassorbibile in seta siliconata plurifilamento						
3336	Silk braided black	3/0	75	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
3335	Silk braided black	4/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	19
3320	Silk braided black	4/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
3154	Silk braided black	3/0	45	½ cerchio corpo cilindrico	HRT	17
Chirafilon monofil Blue sutura non riassorbibile in PVDF (polivinilidenfluoruro) monofilamento						
TF 6101	Chirafilon monofil. Blue	6/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	12
TF 6105	Chirafilon monofil. Blue	5/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15
TF 6106	Chirafilon monofil. Blue	4/0	45	⅜ cerchio taglio inverso	DS	15



Motore Implanter Led

Precisione, resistenza, sicurezza

Implanter, l'assistente perfetto per i trattamenti di implantologia dentale ad alta precisione. Tecnologia Led e touch screen con programmi personalizzati.

* Non disponibile per tutti i paesi

Implanter | Interfaccia utente intuitiva



Contrangolo potente e stabile

Il contrangolo a LED garantisce visibilità ottimale per trattamenti precisi ed efficienti.

La precisione elevata del contrangolo, con minime oscillazioni, consente un'erogazione stabile della coppia sia a velocità elevate che basse. Cuscinetti avanzati assicurano prestazioni e durata.

Zero configurazioni manuali

Un ampio schermo a colori assicura una visualizzazione chiara delle immagini di ogni procedura. Parametri pre-impostati eliminano la necessità di configurazioni manuali.



www.osseotouch.com

@Osseotouch   



ITALIAN DISTRIBUTOR

OSNRGY S.r.l Piazza Garibaldi 9
Gallarate (VA) 21013 Italy

contact@osseotouch.com
0331 15 35 586
329 744 3204



U.S.A DISTRIBUTOR MANUFACTURER

Osseotouch LLC 20585 County Road 13,
Suite B, Fairhope, AL 36532

cs@osseotouch.com
+1-251-210-7761



DISTRIBUDOR PARA ESPAÑA

Osseotouch Iberica SL Carrer de Pizarro 12,
Puerta 1 Valencia 46004

+34662401423